

# MANUAL DE OPERACIÓN

## LÁSER TERAPÉUTICO VETERINARIO VETLIGHT





# ÍNDICE

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Seguridad Eléctrica y Precauciones ..... | 3   |
| Ficha Técnica .....                      | 7   |
| Instrucciones de Operación .....         | 8   |
| Accesorios .....                         | 9   |
| Teoría de Operación .....                | 10  |
| Pestaña Led .....                        | 13  |
| Pestaña Láser .....                      | 16  |
| Pulsado .....                            | 17  |
| Continuo .....                           | 22  |
| iLIB .....                               | 26  |
| Pestaña Protocolos .....                 | 30  |
| Protocolos Personalizados .....          | 32  |
| Led Pulsado .....                        | 36  |
| Led Continuo .....                       | 41  |
| Láser Pulsado .....                      | 46  |
| Láser Continuo .....                     | 52  |
| Láser iLIB .....                         | 58  |
| Pestaña Configuraciones .....            | 64  |
| Información .....                        | 66  |
| Acerca de .....                          | 67  |
| Utilidades - Log Buffer .....            | 69  |
| Utilidades - Diagnostico .....           | 73  |
| Instalación y Conexión .....             | 78  |
| Conexión de los Pads .....               | 80  |
| Conexión de los Diodos Láser .....       | 81  |
| Procedimientos de Usuario .....          | 84  |
| Troubleshooting .....                    | 87  |
| Sistema físico del equipo .....          | 87  |
| Arquitectura interna .....               | 88  |
| Contraindicaciones .....                 | 93  |
| Terapia Láser .....                      | 93  |
| Fototipo Veterinario .....               | 95  |
| Garantía .....                           | 98  |
| Notas del Vendedor .....                 | 101 |

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRECAUCIONES

---

Precaución: El texto con un indicador de **"PRECAUCIÓN"** describe situaciones que pueden implicar riesgos de seguridad con potencial de causar lesiones leves o moderadas al usuario, o daños al equipo.

### **PRECAUCIÓN**

- No opere esta unidad en un entorno en el que se estén utilizando otros dispositivos que irradian energía electromagnética intencionalmente sin protección. Los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y móviles pueden afectar a los equipos eléctricos médicos.
- Esta unidad debe operarse, transportarse y almacenarse a temperaturas entre 15 ° C y 40° C (59 ° F y 104 ° F), con un rango de humedad relativa entre 30% - 60%. Donde la presión atmosférica esté entre 950 hPa y 1050 hPa.
- Inspeccione los cables y conectores antes de cada uso.
- El **Láser Terapéutico Fotón PRO** no está diseñado para impedir la entrada de agua u otros líquidos. La infiltración de líquidos puede causar mal funcionamiento de los componentes internos del sistema y generar un riesgo de lesiones para el paciente.
- Maneje el puntero láser con cuidado. El manejo inadecuado puede afectar negativamente a sus características.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRECAUCIONES

---

- No desarme, modifique ni altere la unidad ni sus accesorios. Estas acciones pueden provocar daños al equipo, mal funcionamiento, riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.
- El no usar y mantener el **Láser Terapéutico Veterinario VETLIGHT** y sus accesorios de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual ***invalidará su garantía.***

Advertencia: El texto con un indicador de "**ADVERTENCIA**" explicará posibles infracciones de seguridad que potencialmente causarán lesiones graves y daños al equipo.



### ADVERTENCIA

- El **Láser Terapéutico Fotón PRO** no debe usarse adyacente a otros equipos ni apilado con ellos. En caso de que sea necesario utilizarlo en dicha configuración, se debe verificar su funcionamiento normal mediante observación directa del equipo en las condiciones reales de uso.
- El usuario debe mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Antes de administrar cualquier tratamiento a un paciente, el operador debe familiarizarse con los procedimientos operativos correspondientes a cada modo de tratamiento disponible, así como con sus indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Consulte la documentación aplicable y otras fuentes. para obtener información adicional sobre la aplicación de la terapia láser.

## LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

# SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRECAUCIONES

---

- Para evitar descargas eléctricas, desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de intentar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- Asegúrese de leer todas las instrucciones de funcionamiento antes de tratar a un paciente.
- Deseche todos los productos de conformidad con las regulaciones y normativas locales y nacionales aplicables.
- No deje caer el puntero láser sobre superficies duras. No enfríe un puntero láser sobrecalentado con agua helada ni con bolsas de hielo. Evite que el puntero láser alcance repetidamente su temperatura máxima de operación. Estas condiciones pueden causar daños al diodo láser. Los daños derivados de estas condiciones no están cubiertos por la garantía.
- No encienda ni apague la unidad mientras esté conectada al paciente.
- Utilice únicamente accesorios diseñados y especificados para esta unidad. No utilice accesorios fabricados por terceros. **DNR ingeniería no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso de accesorios NO autorizados.** El uso de accesorios o cables no especificados puede provocar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad de esta unidad.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRECAUCIONES

---

Advertencia: El texto con un indicador de "**ADVERTENCIA**" explicará posibles infracciones de seguridad que potencialmente causarán lesiones graves y daños al equipo.



**PELIGRO**

- No conecte la unidad a la fuente de alimentación sin verificar previamente que el voltaje suministrado corresponda al especificado para el equipo.
- El uso de un voltaje incorrecto puede provocar daños en la unidad, mal funcionamiento, riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones personales. Esta unidad fue construida para operar únicamente con el voltaje especificado en la placa de identificación y el número de serie. Si la unidad no está correctamente clasificada o presenta alguna discrepancia, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de DNR Ingeniería antes de utilizar el equipo.
- La terapia láser no debe aplicarse sobre los ojos. Tanto el operador como el paciente deben utilizar protección ocular adecuada durante el uso del equipo.



**Precaución:** Este producto emite radiación óptica posiblemente peligrosa.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## FICHA TÉCNICA

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCESORIOS ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Manual de Usuario VETLIGHT                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| <u>Pads LED</u><br>Led IR (850 nm) con potencia de 400 mW<br>Led R (650 nm) con potencia de 300 mW<br>Led AMB (595 nm) con potencia de 200 mW<br>Led VDE (525 nm) con potencia de 200 mW<br>Led AZU (460 nm) con potencia de 200 mW |                                                                                              |
| <u>Diodos Láser</u><br>Diodo IR (850 nm) con potencia de 200 mW<br>Diodo R (650 nm) con potencia de 200 mW<br>Diodo R-iLIB (650 nm) con potencia de 100 mW<br>Diodo AZU (460 nm) con potencia de 100 mW                             |                                                                                              |
| Apertura (pads) de 3 cm de diámetro                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Apertura (diodos láser) 0.91 cm de diámetro                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Estuche para transporte: 380 x 310 x 145 mm                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Cable de alimentación 15 V                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Fuente de alimentación                                                                                                                                                                                                              | 100-240V~1.6A, 50/60 Hz                                                                      |
| Modo de operación                                                                                                                                                                                                                   | Pulsado y Continuo/iLIB                                                                      |
| Frecuencia                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED: 1 a 250 Hz</li> <li>Láser: 1 a 10 kHz</li> </ul> |
| Clase del Láser                                                                                                                                                                                                                     | 3B                                                                                           |
| Duty Cycle                                                                                                                                                                                                                          | 25%, 50%, 75%                                                                                |
| Protocolos                                                                                                                                                                                                                          | 32 establecidos                                                                              |
| *Las dimensiones se indican como Ancho x Alto x Largo                                                                                                                                                                               |                                                                                              |

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El presente manual proporciona las instrucciones necesarias para la operación segura y correcta del equipo **Láser Terapéutico Veterinario VETLIGHT**. Lea este manual completamente antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.



1. Interruptor de encendido/apagado (On/Off)



2. Diodos láser (3)



3. Conectores para diodos láser



4. Pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas



5. Puerto de alimentación



6. Pads LED (6)



7. Base estructural del equipo



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## ACCESORIOS

---

El equipo se entrega con un conjunto de accesorios diseñados para facilitar su uso, optimizar su desempeño y asegurar una experiencia de operación eficiente.



### DIODOS LÁSER

- Láser Infrarrojo de 780 nm, 100 mW, (Goma Gris)
- Láser Rojo de 650 nm, 100 mW (Goma Negra)
- Láser Azul de 460 nm, 100 mW (Goma Azul)



### PADS LED

Permite la emisión de luz LED de alta potencia para una distribución uniforme de la energía en la zona de tratamiento.



### MANUAL DE OPERACIÓN

Documento con instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del equipo



### CABLE DE ALIMENTACIÓN

Accesorios para la alimentación eléctrica y carga del equipo



### ESTUCHE PROTECTOR

Destinado al almacenamiento y transporte seguro del equipo



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

1. Conecte el eliminador de corriente proporcionado al puerto de alimentación del equipo. A continuación, conecte el eliminador a una fuente de suministro eléctrico compatible con las especificaciones del equipo.

**Sugerencia:** Para mayor protección, se recomienda utilizar un regulador de voltaje con capacidad mínima de 2000 W. Asegúrese de que el regulador esté en condiciones óptimas de funcionamiento antes de operar el equipo.

2. Active el switch principal de color rojo para encender el equipo.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

3. Una vez encendido el equipo, el sistema iniciará automáticamente la carga de las imágenes, los sonidos y los protocolos operativos. Espere a que este proceso finalice.
4. Al completar la carga, la pantalla mostrará el logotipo del fabricante, el nombre del equipo, la versión y la opción "**Comenzar**".
5. Seleccione la opción "**Comenzar**" en la pantalla táctil para acceder al menú principal y continuar con la operación del equipo.



Cargando imagen 32/32... (0 errores)

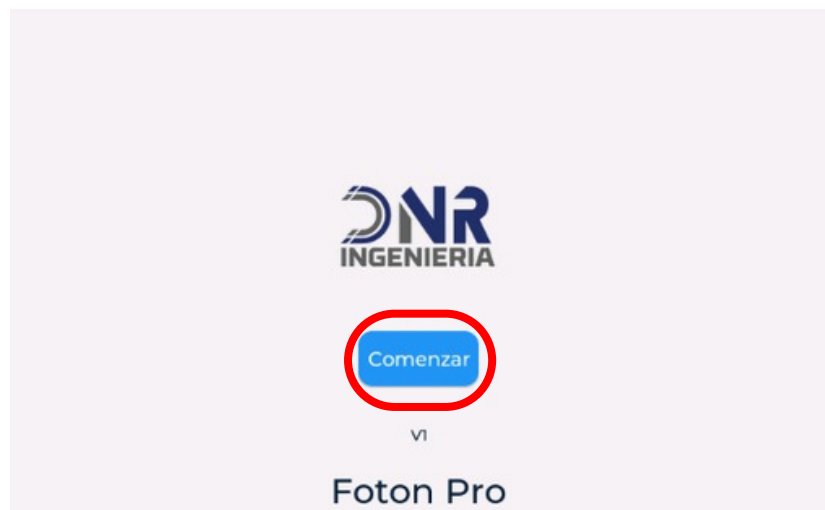

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

Tras completar la inicialización, el equipo mostrará el menú principal, desde el cual el usuario podrá acceder a las distintas funciones de operación y configuración del sistema.

En la parte superior de la pantalla se encuentra las pestañas **LED**, **Láser**, **Protocolos** y **Configuraciones**. Cada una de estas pestañas proporciona acceso a funciones específicas del equipo, las cuales se describen cada una de las siguientes secciones.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Led

1. Acceda a la pestaña **LED** para configurar los parámetros de emisión correspondientes a la terapia mediante luz **LED**.
2. En la pantalla se visualizarán los siguientes parámetros configurables:
  - **Tiempo de terapia:** expresado en minutos y segundos.
  - **Modo emisión:** seleccionable entre continuo o pulsado.

Cuando no se haya seleccionado un protocolo reconfigurado, el operador podrá modificar manualmente los parámetros disponibles mediante la interfaz táctil, ajustando:

3. El modo de emisión (continuo o pulsado).



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

4. La duración del tratamiento.



5. Ajustar la frecuencia (Hz), exceptuando el modo continuo y el tipo de luz LED a emplear.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

El sistema permite la selección de diferentes longitudes de onda correspondientes a luz **roja, verde, azul, ámbar e infrarroja**, según la configuración establecida por el operador.

6. Una vez establecidos los parámetros deseados, el sistema habilitará automáticamente el **botón de inicio**.

- Para iniciar la terapia, seleccione el **ícono verde con el símbolo de inicio** en la pantalla táctil.
- Para pausar la terapia, **seleccione el ícono rojo con el símbolo de pausa**.
- Para detener la terapia, **el botón de inicio se convierte detener**.



**Consideración:** Si selecciona un protocolo desde la pestaña correspondiente, el sistema configurará automáticamente los parámetros de tratamiento, incluyendo la duración, el modo de emisión, y el tipo de luz LED. **Los parámetros serán configurados automáticamente de acuerdo con el protocolo seleccionado. Cualquier modificación realizada por el operador tendrá efecto únicamente durante la sesión en curso y no será guardada en la memoria del sistema ni alterará la configuración predeterminada del protocolo.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

Acceda a la pestaña **Láser** para configurar los parámetros de emisión correspondientes a la terapia mediante luz láser.

En la pantalla visualizará los siguientes parámetros generales:

- **Densidad energética ( $\text{J}/\text{cm}^2$ )**, ajustable en un rango de 1 a  $100 \text{ J}/\text{cm}^2$ .
- **Modo emisión**, pulsado, continuo e iLIB
- **Tiempo de terapia**, expresado en minutos y segundos.
- **Tipo de luz láser**, según la longitud de onda seleccionada (rojo, azul, infrarrojo).
- **Duty Cycle**, ajustable en valores de 25%, 50% y 75%. A mayor porcentaje de ciclo de trabajo (Duty Cycle), mayor será el tiempo de emisión del láser.
- **Energía depositada (J)**, indicador que muestra la cantidad acumulada de energía administrada al paciente durante la sesión de tratamiento.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### PULSADO

1. Seleccione el modo **pulsado** para configurar el láser en emisión por pulsos, conforme al ciclo de trabajo seleccionado.

En este modo el láser alterna automáticamente entre periodos de emisión activa y periodos sin emisión, durante el tiempo de tratamiento establecido.



2. Defina la **densidad energética (1-100 J/cm<sup>2</sup>)** correspondiente a la cantidad de energía que desea depositar en el paciente canino.

Al modificar la Densidad Energética (DE), el equipo ajusta automáticamente el tiempo de terapia en función de los parámetros configurados.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### PULSADO

3. El **tiempo de tratamiento** se calcula automáticamente conforme a la energía programada y se relaciona directamente con el **ciclo de trabajo** seleccionado.
4. Puede ajustar la **frecuencia (Hz)**, correspondiente al número de pulsaciones por segundo.



**Observación:** El **ciclo de trabajo (duty cycle)** define el porcentaje de tiempo en el que el láser permanece en emisión activa dentro de cada ciclo de operación en modo pulsado.

- **75%:** El láser emite durante 75% del ciclo y permanece en reposo el 25% restante.
- **50%:** El láser emite períodos de emisión y reposo en proporciones equivalentes.
- **25%:** El láser emite durante el 25% del ciclo y permanece en reposo el 75% restante.


# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### PULSADO

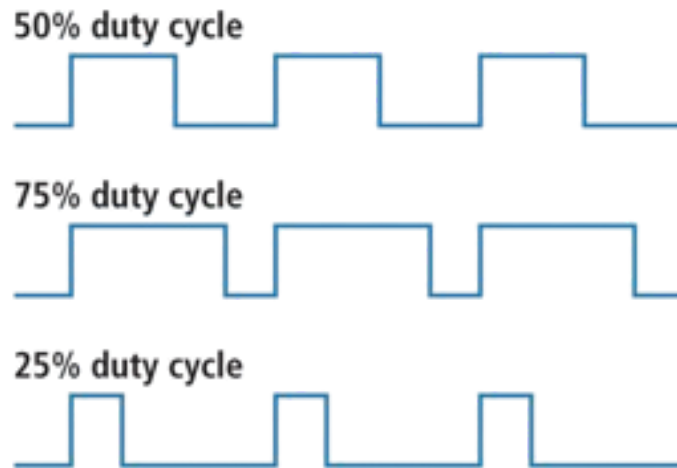

5. El icono de **Energía depositada (J)** muestra en tiempo real la cantidad de energía suministrada al paciente canino.

**Observación:** El equipo emite una señal sonora cada vez que se deposita 1 Joule, como apoyo al operador para el monitoreo del tratamiento.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### PULSADO

El sistema permite la selección de diferentes longitudes de onda correspondientes a luz **roja**, **azul**, e **infrarroja**, según la configuración establecida por el operador.



6. Una vez establecidos los parámetros deseados, el sistema habilitará automáticamente el **botón de inicio**.
- Para iniciar la terapia, seleccione el **ícono verde con el símbolo de inicio** en la pantalla táctil.
  - Para interrumpir o pausar la terapia, **seleccione el ícono rojo con el símbolo de pausa**.
  - Para detener la terapia, **el botón de inicio se convierte detener**.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### PULSADO



**Consideración:** Si selecciona un protocolo desde la sección correspondiente, el sistema configurará automáticamente los parámetros de tratamiento, incluyendo la densidad energética ( $\text{J}/\text{cm}^2$ ), modo de emisión (pulsado, continuo o iLIB), frecuencia, ciclo de trabajo (duty cycle), tiempo de terapia, tipo de luz láser. **Los parámetros serán configurados automáticamente de acuerdo con el protocolo seleccionado. Cualquier modificación realizada por el operador tendrá efecto únicamente durante la sesión en curso y no será guardada en la memoria del sistema ni alterará la configuración predeterminada del protocolo.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### CONTINUO

1. Seleccione el modo **continuo** para configurar el láser en emisión constante durante todo el tiempo de tratamiento.

En este modo, la energía se emite de manera ininterrumpida, por lo que:

- La **frecuencia** no es configurarle.
- El **ciclo de trabajo (duty cycle)** no aplica.



2. Defina la **densidad energética** (1-100J/cm<sup>2</sup>) correspondiente a la cantidad de energía que desea depositar en el paciente canino.

Al modificar la Densidad Energética (DE), el equipo ajusta automáticamente el tiempo de terapia en función de los parámetros configurados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### CONTINUO



3. El **tiempo de tratamiento** se calcula automáticamente conforme a la energía programada y se relaciona directamente con el **ciclo de trabajo** seleccionado.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### CONTINUO

4. El icono de **Energía depositada (J)** muestra en tiempo real la cantidad de energía suministrada al paciente canino.

**Observación:** El equipo emite una señal sonora cada vez que se deposita 1 Joule, como apoyo al operador para el monitoreo del tratamiento.



El sistema permite la selección de diferentes longitudes de onda correspondientes a luz **roja, azul, e infrarroja**, según la configuración establecida por el operador.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### CONTINUO

5. Una vez establecidos los parámetros deseados, el sistema habilitará automáticamente el **botón de inicio**.

- Para iniciar la terapia, seleccione el **ícono verde con el símbolo de inicio** en la pantalla táctil.
- Para interrumpir o pausar la terapia, **seleccione el ícono rojo con el símbolo de pausa**.
- Para detener la terapia, **el botón de inicio se convierte detener**.



**Consideración:** Si selecciona un protocolo desde la sección correspondiente, el sistema configurará automáticamente los parámetros de tratamiento, incluyendo la densidad energética ( $\text{J}/\text{cm}^2$ ), modo de emisión (pulsado, continuo o iLIB), frecuencia, ciclo de trabajo (duty cycle), tiempo de terapia, tipo de luz láser. **Los parámetros serán configurados automáticamente de acuerdo con el protocolo seleccionado. Cualquier modificación realizada por el operador tendrá efecto únicamente durante la sesión en curso y no será guardada en la memoria del sistema ni alterará la configuración predeterminada del protocolo.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### iLIB

1. Seleccione el modo **iLIB** para configurar la emisión láser en modalidad de irradiación sistémica.

En este modo:

- No se encuentra disponible la **densidad energética ( $\text{J}/\text{cm}^2$ )** y la **energía depositada (J)**.



2. Defina el **tiempo de terapia** de manera independiente, estableciendo la duración total del tratamiento según el protocolo clínico.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Láser

#### iLIB

3. Ajuste el **ciclo de trabajo (duty cycle)** para determinar el porcentaje de tiempo en que el láser permanecerá en emisión activa dentro de cada ciclo.



4. Configure la frecuencia (Hz) 10 kHz de acuerdo con el tipo de emisión deseada:

- **0 Hz:** *Modo Continuo.*
- **Valor > 0 Hz:** *Modo Pulsado.*



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### iLIB

El sistema permite la selección de diferentes longitudes de onda correspondientes a luz **roja**, **azul**, e **infrarroja**, según la configuración establecida por el operador.



5. Una vez establecidos los parámetros deseados, el sistema habilitará automáticamente el **botón de inicio**.
- Para iniciar la terapia, seleccione el **ícono verde con el símbolo de inicio** en la pantalla táctil.
  - Para interrumpir o pausar la terapia, **seleccione el ícono rojo con el símbolo de pausa**.
  - Para detener la terapia, **el botón de inicio se convierte detener**.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Láser

#### iLIB



**Consideración:** Si selecciona un protocolo desde la sección correspondiente, el sistema configurará automáticamente los parámetros de tratamiento, incluyendo modo de emisión (pulsado, continuo o iLIB), frecuencia, ciclo de trabajo (duty cycle), tiempo de terapia, tipo de luz láser. **Los parámetros serán configurados automáticamente de acuerdo con el protocolo seleccionado. Cualquier modificación realizada por el operador tendrá efecto únicamente durante la sesión en curso y no será guardada en la memoria del sistema ni alterará la configuración predeterminada del protocolo.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

1. Acceda a la pestaña **Protocolos** para consultar las opciones terapéuticas preestablecidas en el sistema.



2. En el **recuadro izquierdo** se visualizará el listado de protocolos disponibles. Deslice hacia arriba para acceder a la totalidad de las opciones.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

3. En el **lado derecho** de la pantalla se mostrará una referencia visual de la afección correspondiente al protocolo seleccionado.



4. En la **parte inferior de la pantalla** se desplegará la información técnica del protocolo, incluyendo lo siguiente:

Si **regreso a la ventana** ya se encontrará configurado:

- Sección de emisión (LED o Láser).
- Modo de emisión (continuo o pulsado).
- Tipo de luz sugerida (rojo, verde, azul, ámbar o infrarrojo).
- Densidad energética ( $\text{J}/\text{cm}^2$ ) o tiempo de terapia, según corresponda.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

5. Al seleccionar un protocolo, el sistema configurará automáticamente los parámetros de tratamiento para su aplicación.

**Observación:** El operador podrá realizar modificaciones a los parámetros establecidos; sin embargo, dichos cambios tendrán efecto únicamente durante la sesión en curso y no alterarán la configuración original del protocolo para futuras aplicaciones.

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

1. En la pestaña **Protocolos**, los **últimos cinco espacios de la lista** están destinados a la creación de protocolos personalizados por el operador.
2. Para crear un nuevo protocolo, seleccione la opción "**Protocolo**", ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

3. El sistema mostrará una leyenda con el siguiente mensaje:

#### **'AVISO IMPORTANTE:**


***Al crear o modificar protocolos de tratamiento, el usuario reconoce y acepta que lo hace bajo exclusiva responsabilidad profesional. La empresa no asume ninguna responsabilidad por datos directos, indirectos, incidentales o consecuentes, incluyendo, sin limitación, lesiones a animales, pérdidas económicas o cualquier otro perjuicio derivado del uso o interpretación de los protocolos generados mediante este dispositivo.***

***El usuario declara poseer la competencia técnica necesaria para la correcta aplicación de los tratamientos y exime a la empresa de toda responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera surgir del uso del equipo.***

***¿Desea continuar?'***

Seleccione:

- **Cancelar**, para regresar a la pantalla anterior.
- **Aceptar**, para continuar con la creación del protocolo.

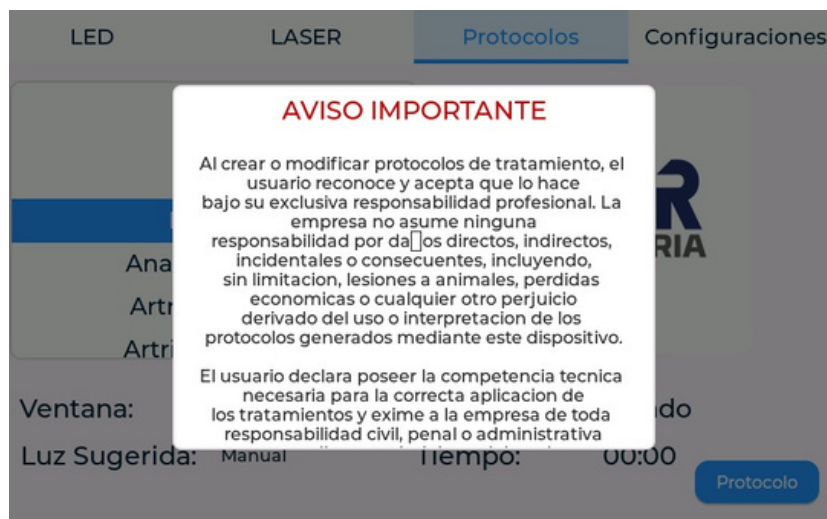


# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

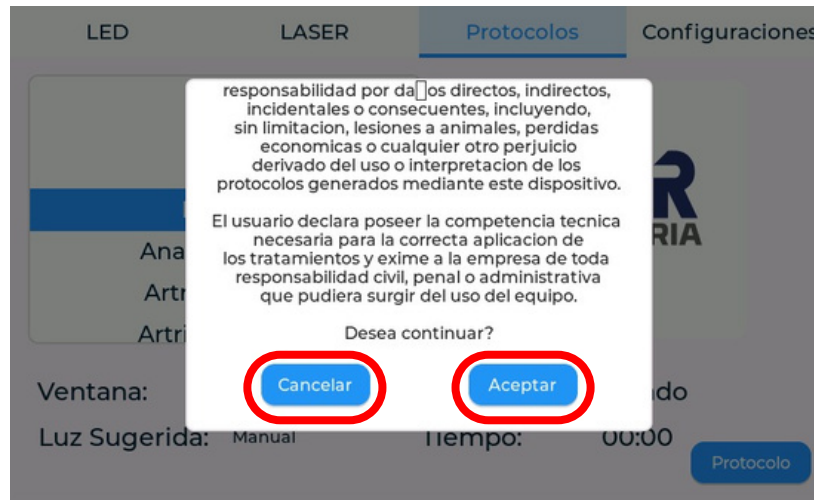

Al seleccionar **Aceptar**, deberá completar los siguientes campos.

4. **Guardar en:** Seleccione uno de los cinco espacios disponibles para almacenar el protocolo personalizado (el protocolo elegido será reemplazado).

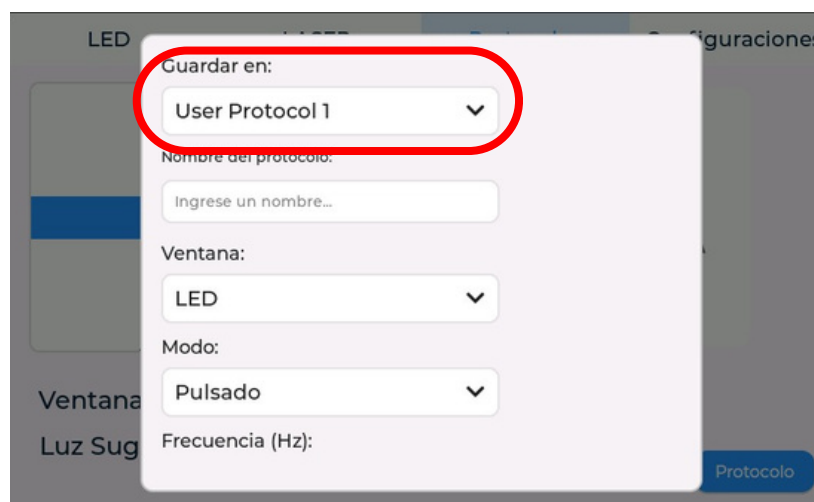

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

5. **Nombre del protocolo:** Ingrese el nombre que permitirá identificarlo en la lista.

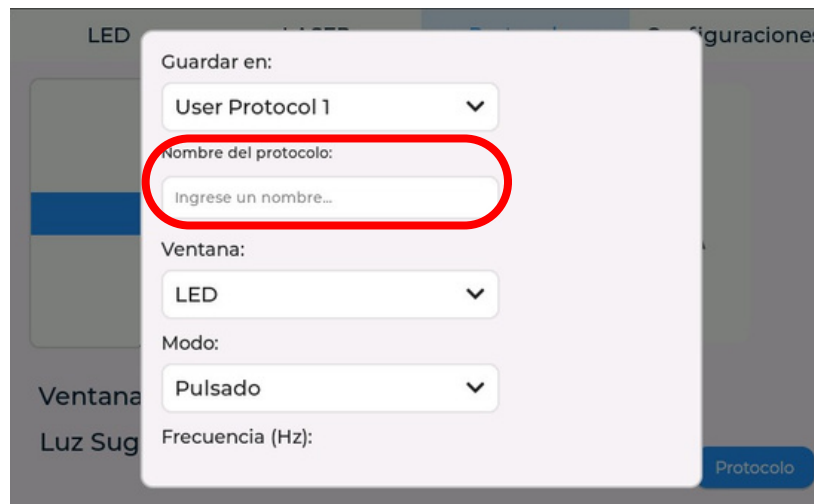

Guardar en:  
User Protocol 1 ▼

Nombre del protocolo:  
Ingrese un nombre...

Ventana:  
LED ▼

Modo:  
Pulsado ▼

Frecuencia (Hz):

Protocolo

6. **Ventana**, seleccione el tipo de emisión terapéutica:

- **LÁSER**
- **LED**

**Importante:** Si selecciona **LÁSER** en el campo "**Ventana**", el sistema mostrará parámetros específicos correspondientes a esta tecnología.

Dichos parámetros serán distintos a los de LED y se explican detalladamente en el apartado Láser, posterior a la descripción de la sección LED.


# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

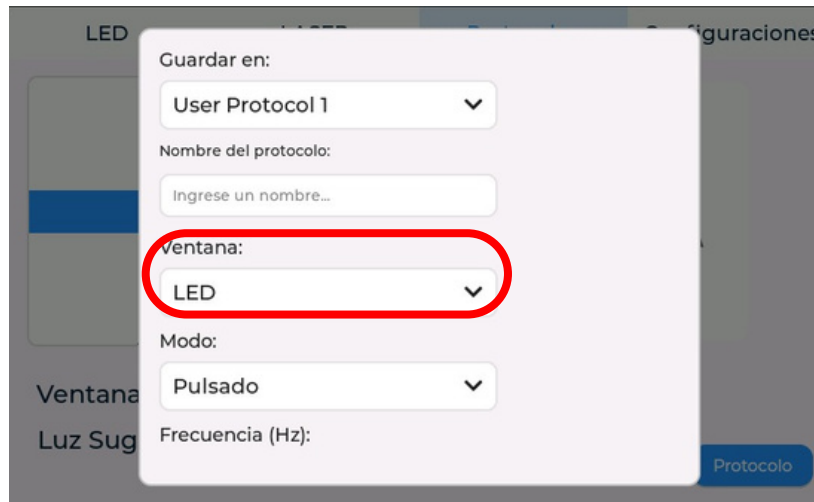

LED

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:

LED

Modo:


Pulsado

Frecuencia (Hz):

Protocolo

#### Led Pulsado

1. Seleccione el modo de emisión "**Pulsado**".
2. El sistema habilitará el campo de **Frecuencia (Hz)**.  
Configure la frecuencia dentro de un rango de **1 a 10,000 Hz**, de acuerdo con el efecto terapéutico que desee generar.

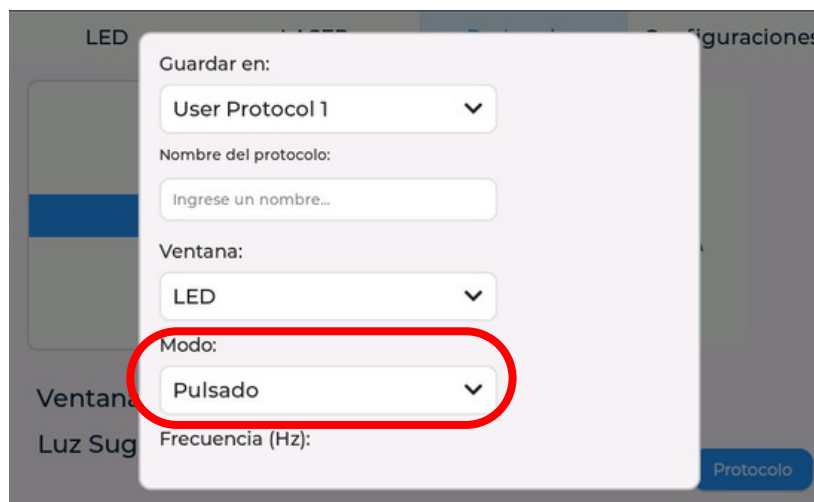

LED

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:

LED

Modo:

Pulsado

Frecuencia (Hz):

Protocolo

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Pulsado*

The screenshot shows a control panel for 'Frecuencia (Hz)'. It features a red oval highlighting the frequency adjustment controls, which include a minus button, a numeric input field showing '00000', and a plus button. Below this, there is a section for 'Luces' with checkboxes for 'Rojo', 'Verde', 'Azul', 'Ambar', and 'Infrarrojo'. At the bottom, there is a 'Duracion (min:seg)' field and a 'Protocolo' button.

3. Posteriormente, seleccione las **luces** que se aplicarán durante la sesión. Puede elegir una o múltiples longitudes de onda, según la necesidad clínica.

The screenshot shows a control panel for 'Luces'. It features a red oval highlighting the light selection controls, which include checkboxes for 'Rojo', 'Verde', 'Azul', 'Ambar', and 'Infrarrojo'. Below this, there is a 'Duracion (min:seg)' field with a minus button, a numeric input field showing '00:00', and a plus button. At the bottom, there are two buttons: 'Guardar y Salir' and 'Salir sin Guardar'. A 'Protocolo' button is also visible on the right side.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN


---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS


##### *Led Pulsado*

4. Establezca la **duración (min:seg)** del tratamiento, dentro de un rango de 1 a 90 minutos.

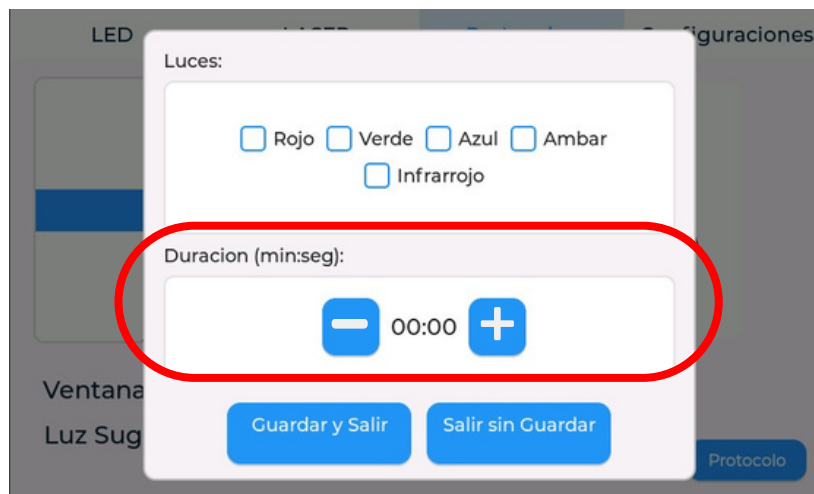

5. Una vez configurados los parámetros del protocolo (modo, frecuencia, luces y duración), el sistema mostrará dos opciones en pantalla:

- **Guardar y Salir.**
- **Salir sin Guardar.**

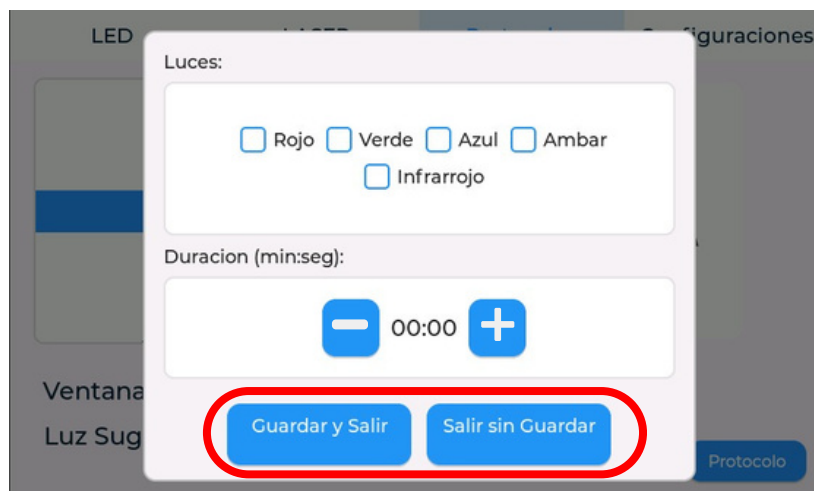

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Pulsado*


6. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

7. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

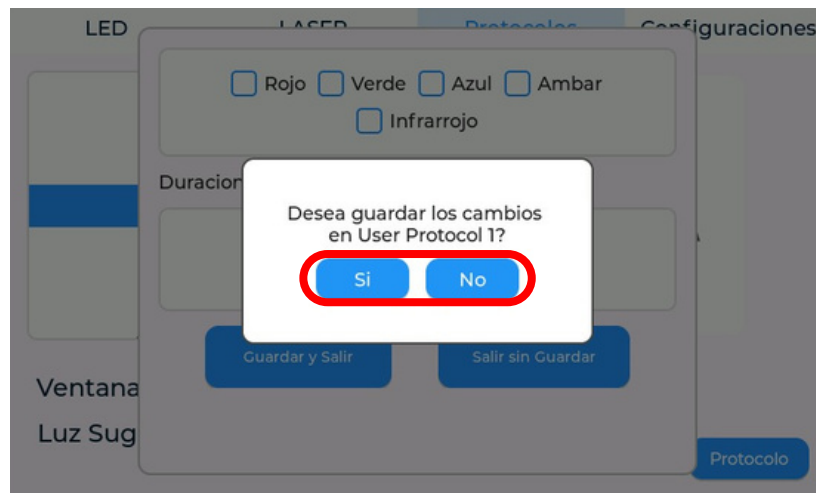

8. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Pulsado*

9. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

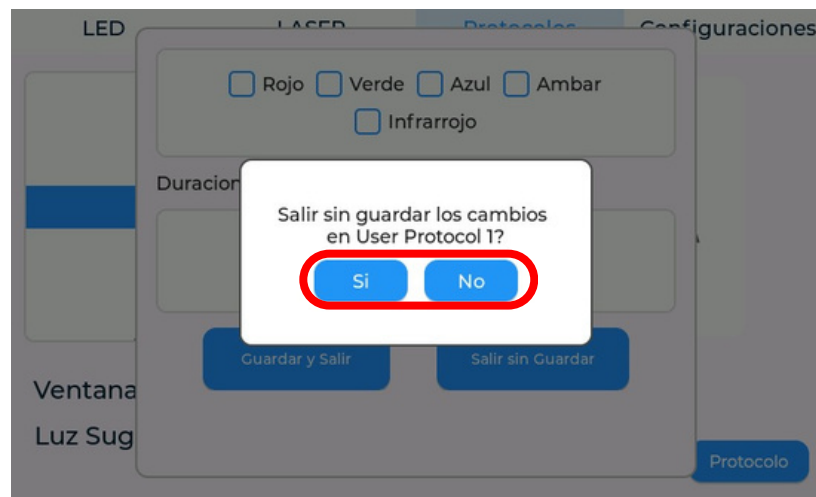

**Observación:** De esta manera, el sistema solicita confirmación antes de guardar o descargar modificaciones, brindando mayor seguridad en la gestión de protocolos personalizados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Continuo*

1. Seleccione el modo de emisión "**Continuo**".

Al activar esta opción, el parámetro de **Frecuencia (Hz)** permanecerá visible en **pantalla**; sin embargo, **se mostrará en estado inactivo (opaco)**, indicando que no se encuentra disponible para su modificación en este modo de emisión.

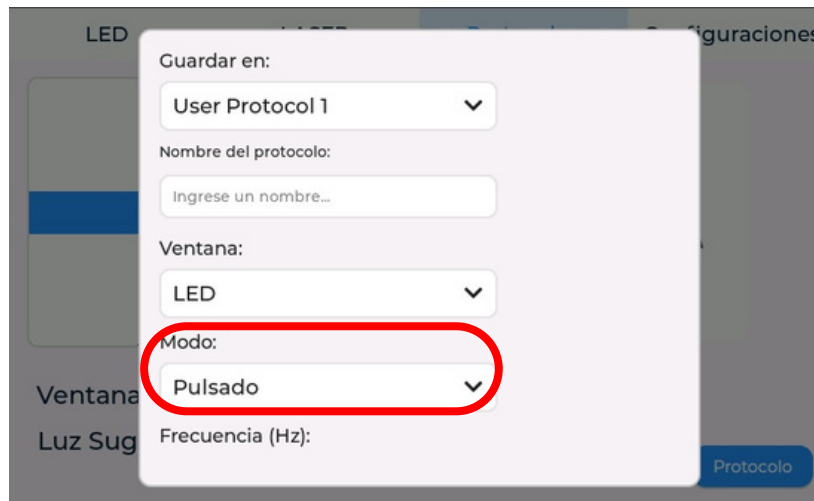

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:


LED

Modo:

Pulsado

Frecuencia (Hz):

Protocolo

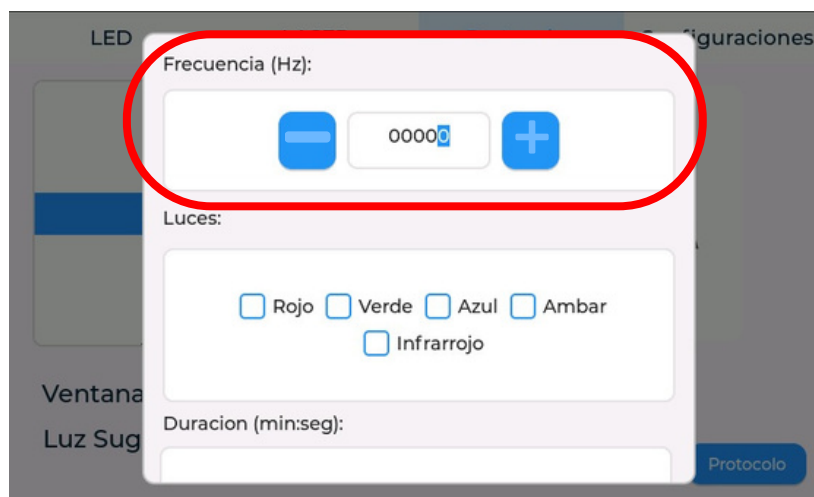

Frecuencia (Hz):

00000

Luces:

☐ Rojo ☐ Verde ☐ Azul ☐ Ambar ☐ Infrarrojo

Duracion (min:seg):

Protocolo

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Continuo*

2. Posteriormente, seleccione las **luces** que se aplicarán durante la sesión. Puede elegir una o múltiples longitudes de onda, según la necesidad clínica.



LED VETLIGHT Configuraciones

Luces:

☐ Rojo ☐ Verde ☐ Azul ☐ Ambar  
☐ Infrarrojo

Duracion (min:seg):

− 00:00 +

Ventana Luz Sug

Guardar y Salir Salir sin Guardar

Protocolo

3. Establezca la **duración (min:seg)** del tratamiento, dentro de un rango de 1 a 90 minutos.



LED VETLIGHT Configuraciones

Luces:

☐ Rojo ☐ Verde ☐ Azul ☐ Ambar  
☐ Infrarrojo

Duracion (min:seg):

− 00:00 +

Ventana Luz Sug

Guardar y Salir Salir sin Guardar

Protocolo

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Continuo*

4. Una vez configurados los parámetros del protocolo (modo, frecuencia, luces y duración), el sistema mostrará dos opciones en pantalla:

- **Guardar y Salir.**
- **Salir sin Guardar.**

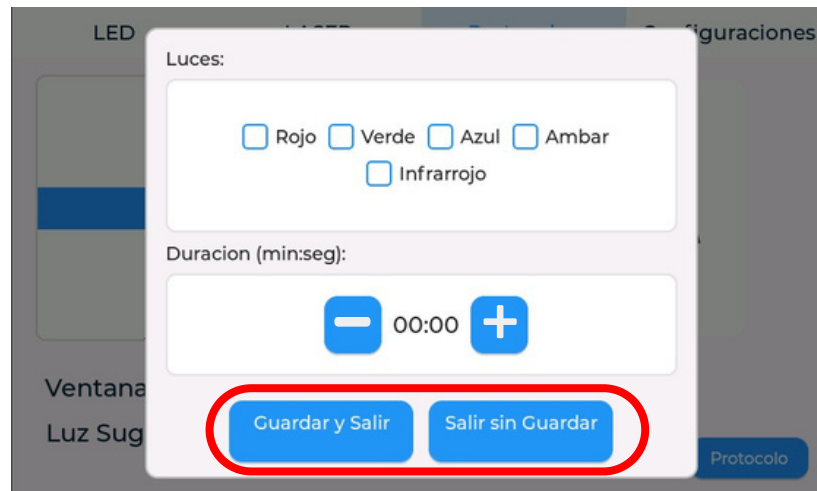

5. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

***¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?***

6. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Continuo*

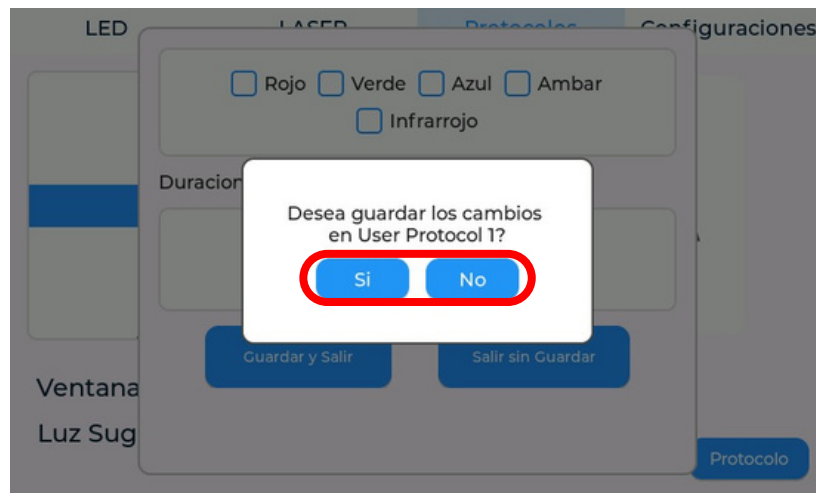

7. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

***'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?***

8. Seleccione:

- **Sí**, para salir sin almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Led Continuo*

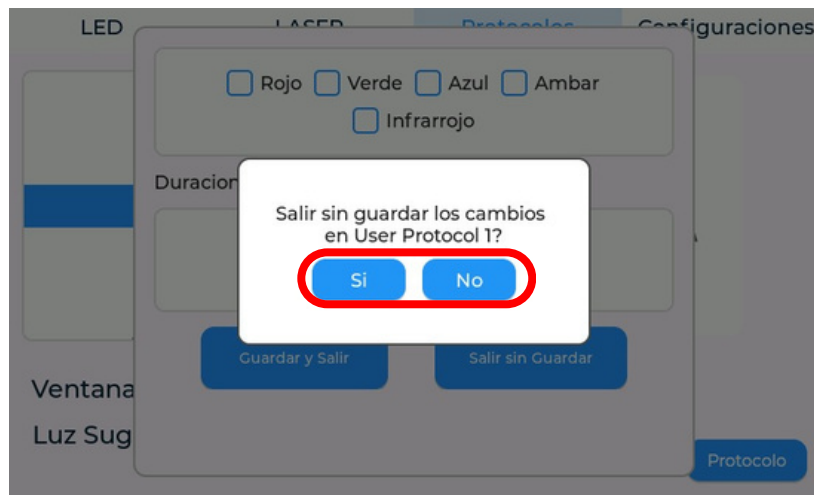

**Observación:** De esta manera, el sistema solicita confirmación antes de guardar o descargar modificaciones, brindando mayor seguridad en la gestión de protocolos personalizados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

1. En el campo ventana, seleccione la opción "**Láser**".  
Al activarla, el sistema mostrará los parámetros específicos correspondientes a esta tecnología.
2. En el apartado modo, seleccione "**Pulsado**" para habilitar la configuración de parámetros dinámicos de emisión.

LED

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:

LASER

Modo:

Pulsado

Frecuencia (Hz):

Protocolo

Ventana

Luz Sug

LED

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:

LASER

Modo:

Pulsado

Frecuencia (Hz):

Protocolo

Ventana

Luz Sug

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN


---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

3. Configure la **Frecuencia (Hz)** dentro de un rango de 1 a 10,000 Hz, determinando el número de pulsaciones por segundo.
4. Seleccione el **tipo de luz láser** que se utilizará durante la sesión:
  - Rojo
  - Azul
  - Infrarrojo

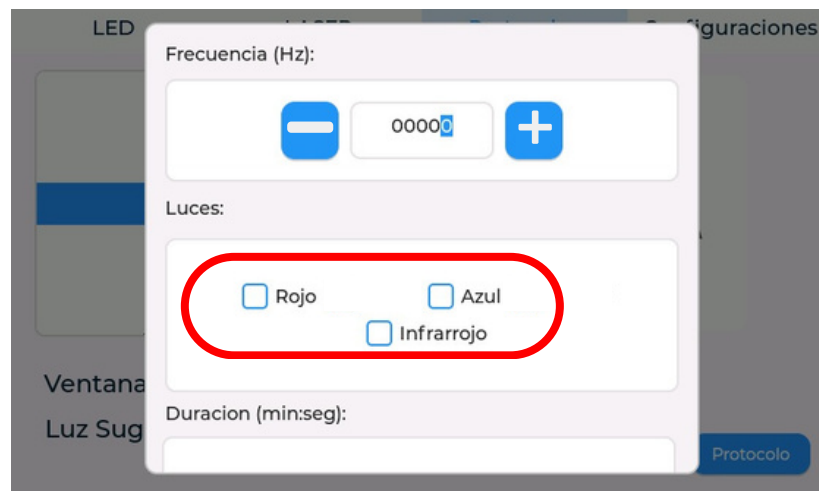

The screenshot shows a configuration window for a laser therapy device. It includes a frequency input field set to 00000 Hz, a section for selecting light types (Rojo, Azul, Infrarrojo) with checkboxes, and a duration input field. A red oval highlights the light type selection area.

Frecuencia (Hz):

00000

Luces:

☐ Rojo ☐ Azul ☐ Infrarrojo

Duración (min:seg):

Protocolo

5. Defina la **densidad energética (DE)** en un rango de **1 a 100 (J/cm<sup>2</sup>)**, correspondiente a la cantidad de energía que desea administrar al paciente canino por unidad de área.


# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

### Pestaña Protocolos


#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

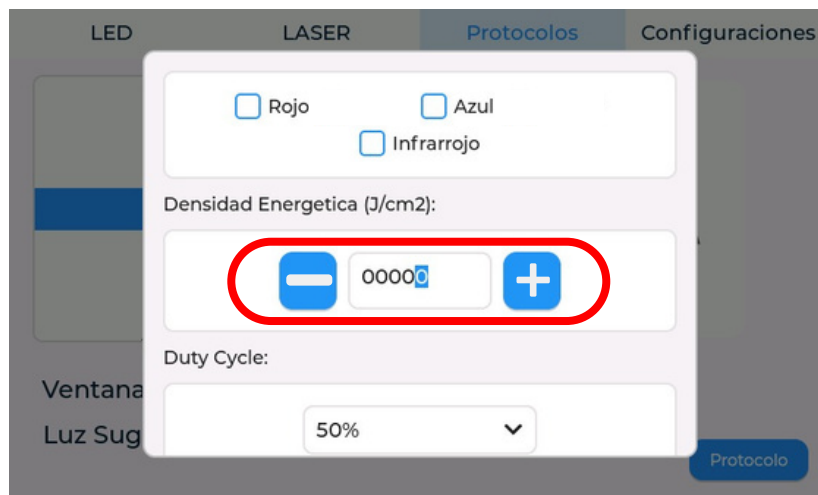

6. Ajuste el **ciclo de trabajo (duty cycle)** seleccionando el porcentaje de emisión activa dentro de cada ciclo:

- 25%
- 50%
- 75%

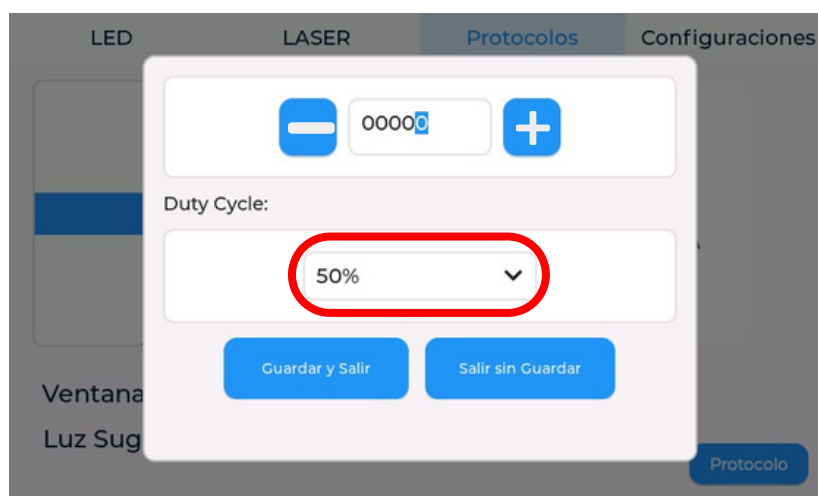

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

7. Una vez configurados los parámetros del protocolo (modo, frecuencia, luces, densidad energética, ciclo de trabajo), el sistema mostrará dos opciones en pantalla:

- **Guardar y Salir.**
- **Salir sin Guardar.**

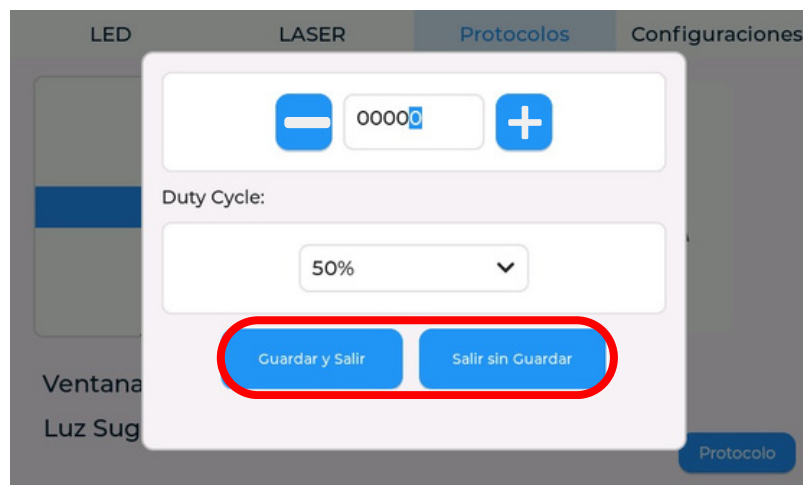

8. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

***'¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'***

9. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

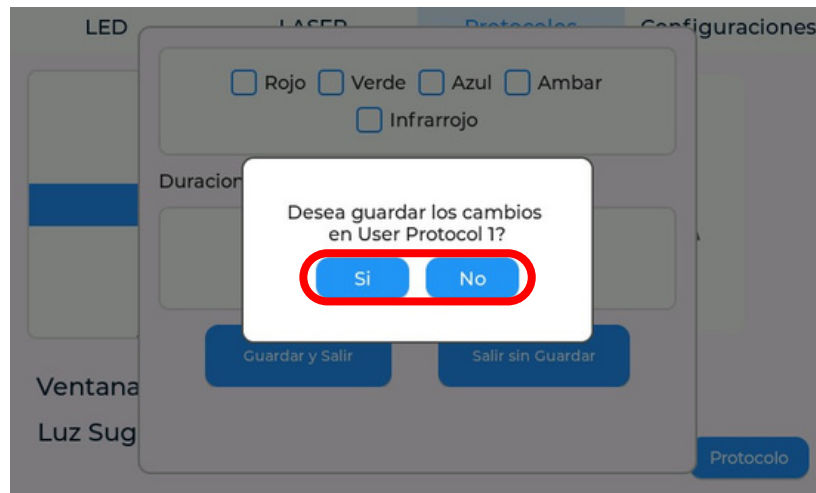

10. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

11. Seleccione:

- **Sí**, para salir sin almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Pulsado*

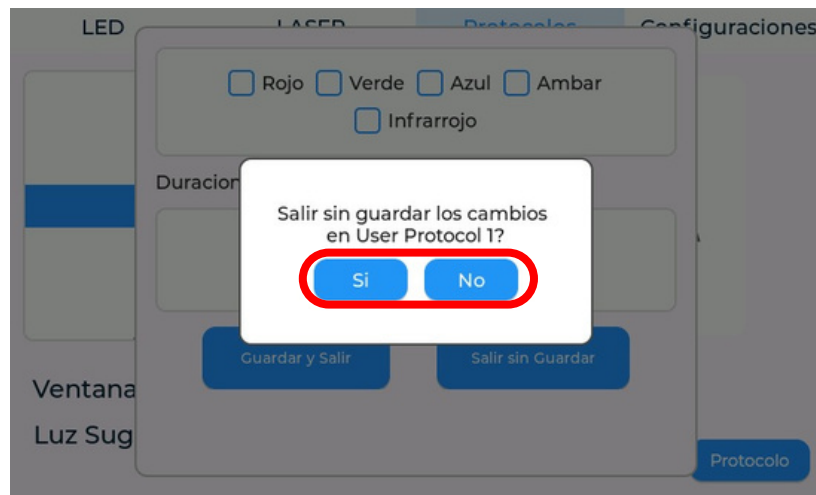

**Observación:** De esta manera, el sistema solicita confirmación antes de guardar o descargar modificaciones, brindando mayor seguridad en la gestión de protocolos personalizados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser Continuo

1. Seleccione el modo de emisión "**Continuo**".

Al activar esta opción, el parámetro de **Frecuencia (Hz)** permanecerá visible en pantalla; sin embargo, se mostrará en estado inactivo (opaco), indicando que no se encuentra disponible para su modificación en este modo de emisión.

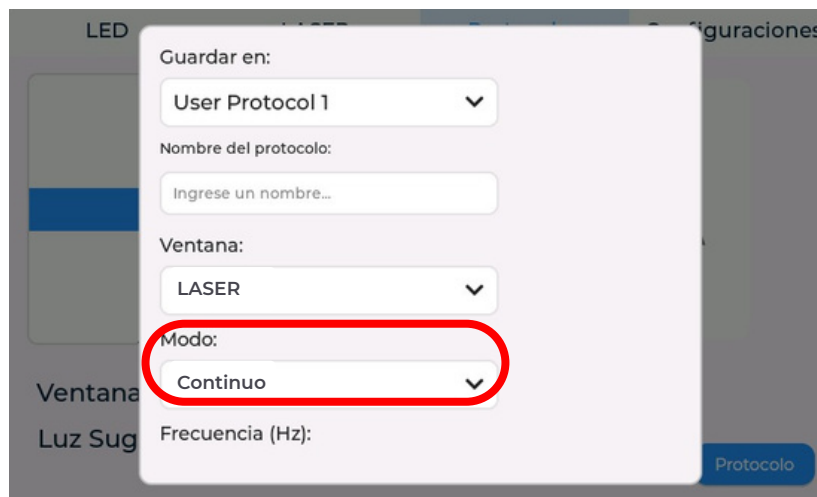

LED

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:


LASER

Modo:

Continuo

Frecuencia (Hz):

Protocolo

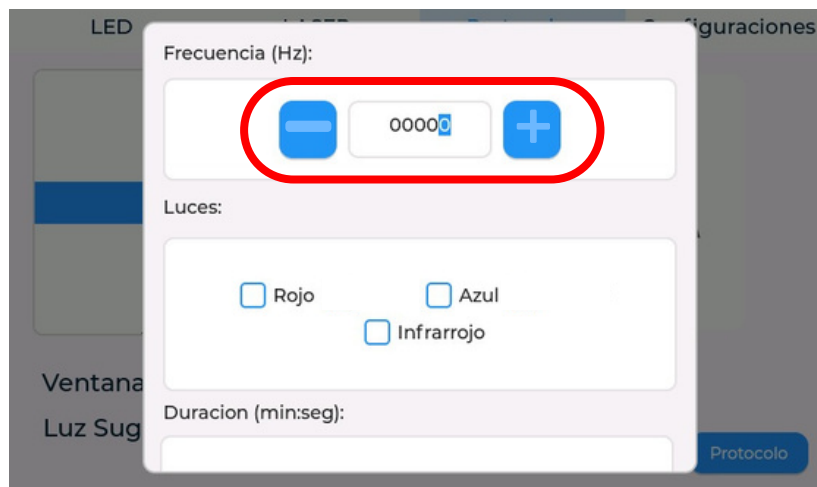

LED

Frecuencia (Hz):

0000

Luces:

☐ Rojo ☐ Azul ☐ Infrarrojo

Duracion (min:seg):

Protocolo

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos


#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser Continuo

3. Seleccione el **tipo de luz láser** que se utilizará durante la sesión:

- Rojo
- Azul
- Infrarrojo

4. Defina la **densidad energética (DE)** en un rango de **1 a 100 (J/cm<sup>2</sup>)**, correspondiente a la cantidad de energía que desea administrar al paciente canino por unidad de área.

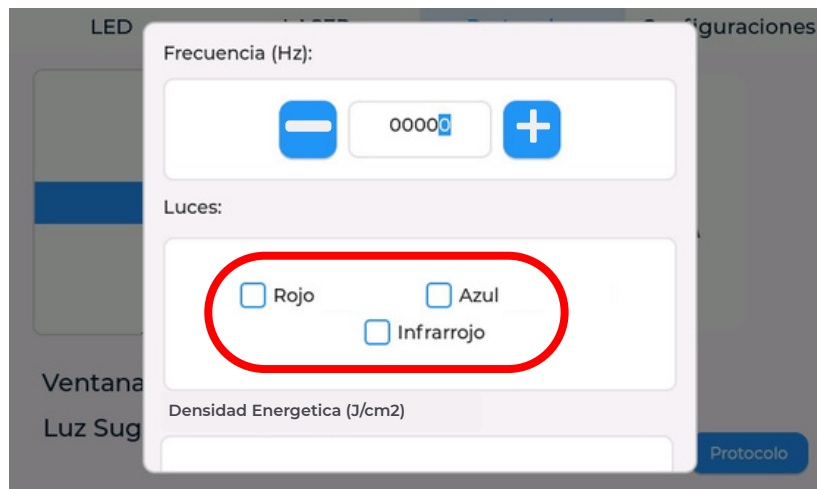

5. Ajuste el **ciclo de trabajo (duty cycle)** seleccionando el porcentaje de emisión activa dentro de cada ciclo:

- 25%
- 50%
- 75%

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos


#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Continuo*

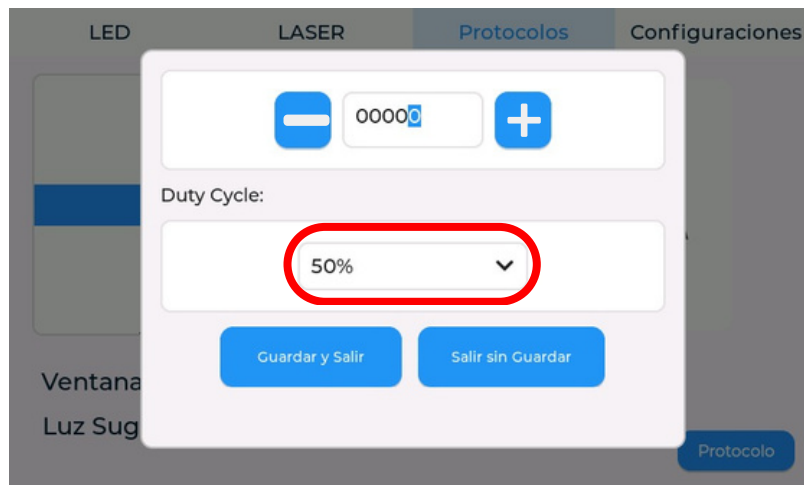

6. Una vez configurados los parámetros del protocolo (modo, luces, densidad energética, ciclo de trabajo), el sistema mostrará dos opciones en pantalla:

- **Guardar y Salir.**
- **Salir sin Guardar.**

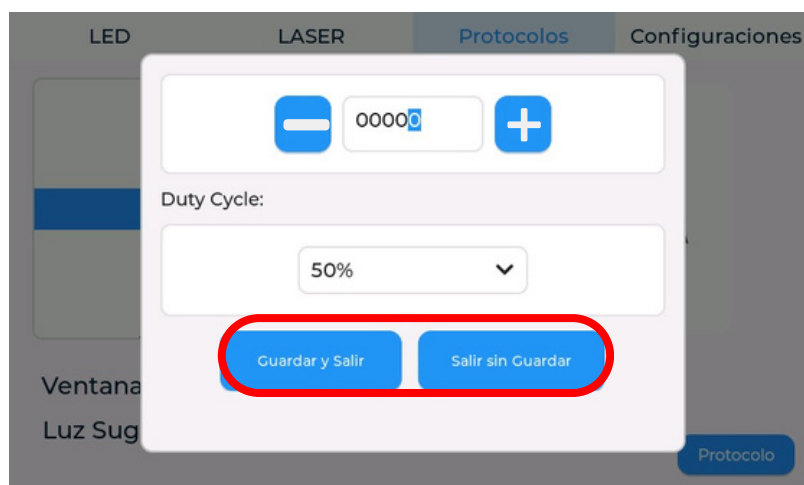

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser Continuo


7. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

8. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

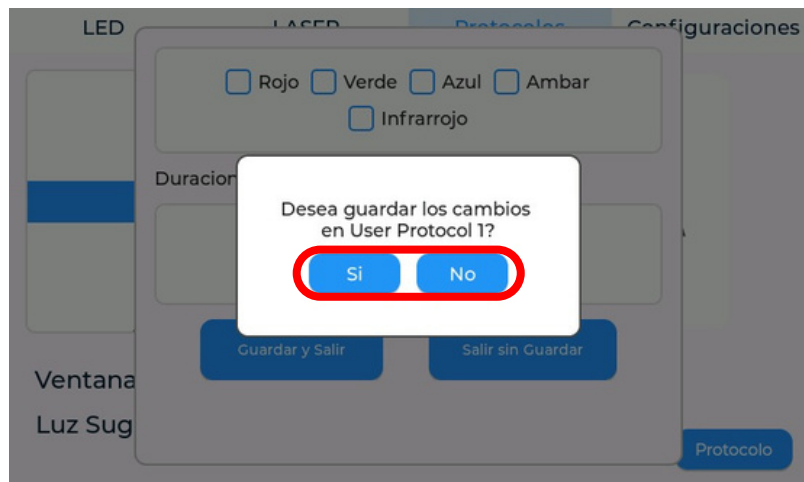

9. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser Continuo


7. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

8. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

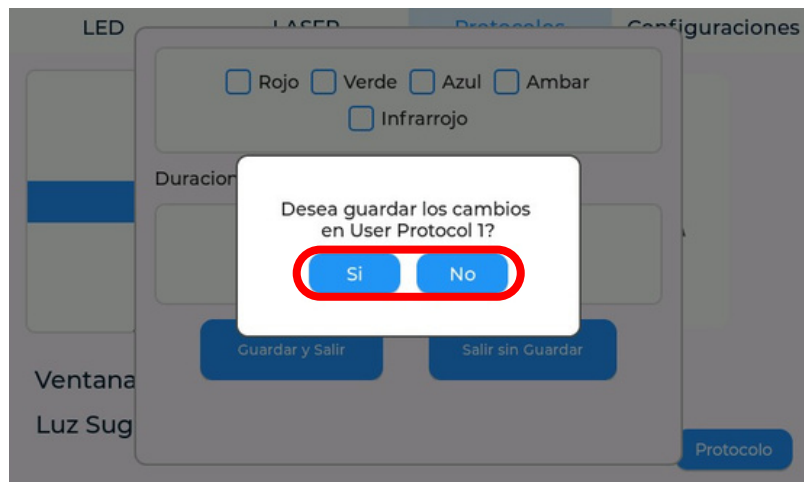

9. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser Continuo*

10. Seleccione:

- **Sí**, para salir sin almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

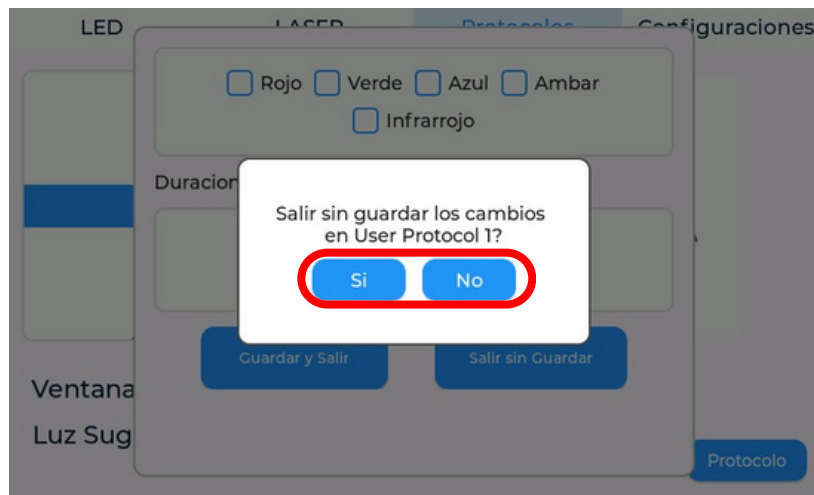

**Observación:** De esta manera, el sistema solicita confirmación antes de guardar o descargar modificaciones, brindando mayor seguridad en la gestión de protocolos personalizados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN


---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser iLIB

1. Seleccione el modo de emisión "**iLIB**" para habilitar la configuración correspondiente a esta modalidad terapéutica.
2. Configure la **Frecuencia (Hz)** dentro de un rango de **1 a 10,000 Hz**, considerando lo siguiente:
  - **0 Hz:** El sistema opera en modo **continuo**.
  - **Valor > 0 Hz:** El sistema opera en modo **pulsado**.

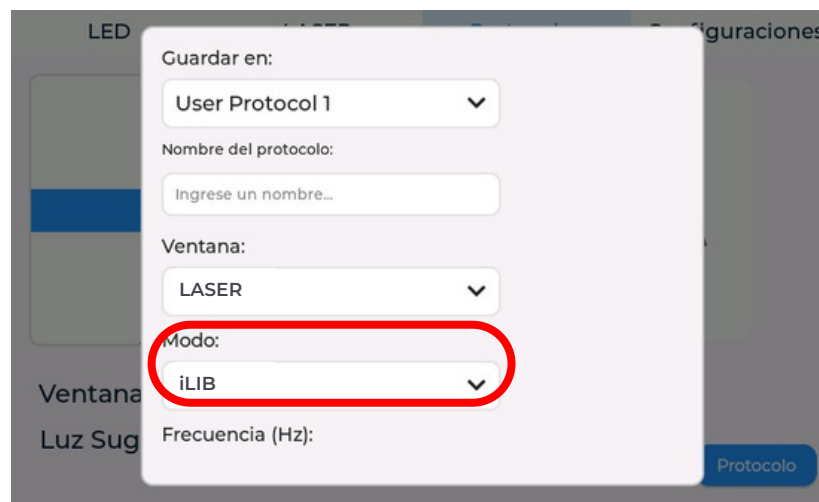

Guardar en:

User Protocol 1

Nombre del protocolo:

Ingrese un nombre...

Ventana:


LASER

Modo:

iLIB

Frecuencia (Hz):

Protocolo

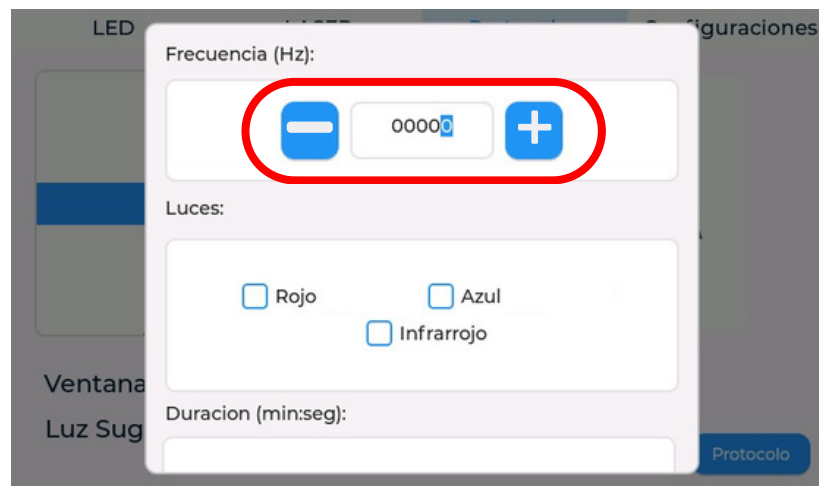

Frecuencia (Hz):

0000

Luces:

☐ Rojo ☐ Azul ☐ Infrarrojo

Duracion (min:seg):

Protocolo

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos


#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser iLIB


3. Seleccione el **tipo de luz láser** que utilizará durante la sesión:

- Rojo
- Azul
- Infrarrojo

Puede elegir una o múltiples longitudes de onda, según el objetivo terapéutico.

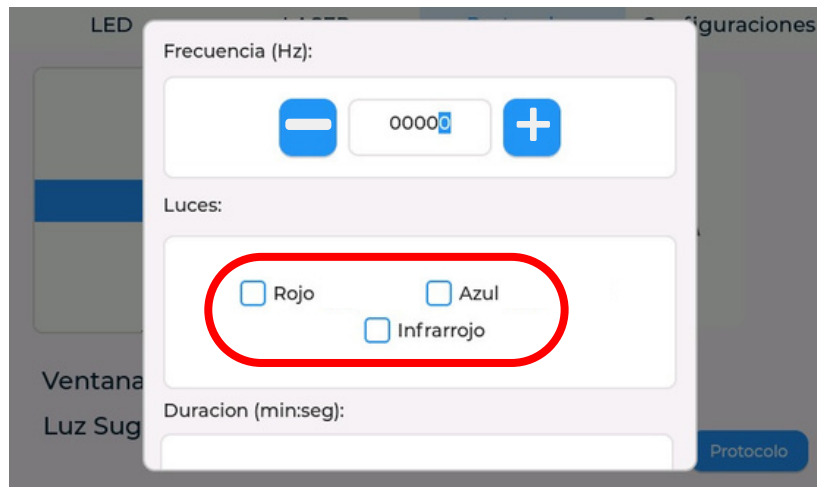

4. Defina la **duración de la terapia (min:seg)** dentro de un rango de **1 a 90 minutos**, conforme al protocolo clínico establecido.

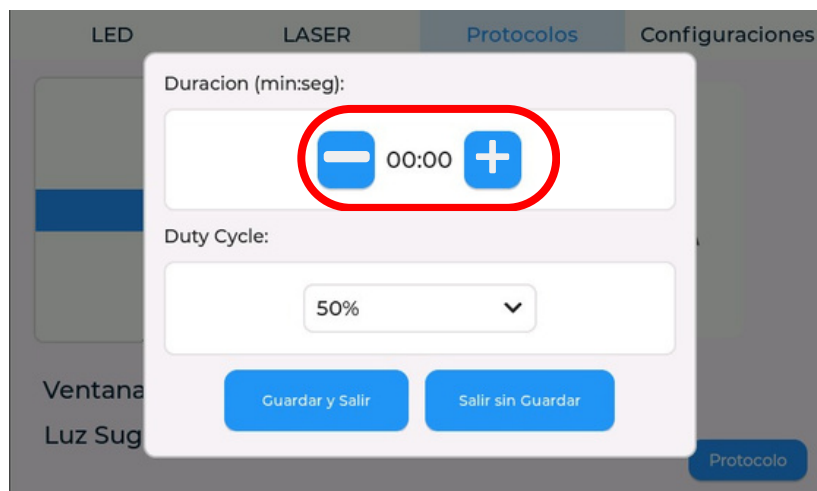

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### *Láser iLIB*

5. Ajuste el **ciclo de trabajo (duty cycle)** seleccionando el porcentaje de emisión activa:

- 25%
- 50%
- 75%

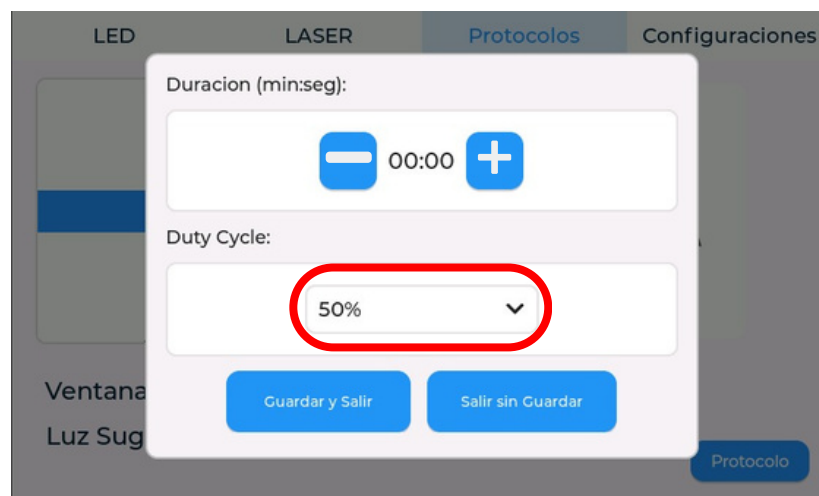

6. Una vez configurados los parámetros del protocolo (modo, frecuencia, luces, duración de la terapia, ciclo de trabajo), el sistema mostrará dos opciones en pantalla:

- **Guardar y Salir.**
- **Salir sin Guardar.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

#### Láser iLIB

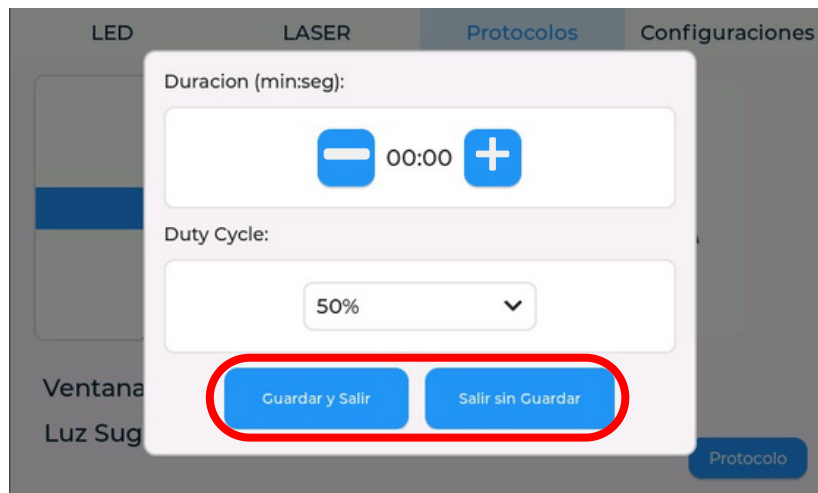

7. Si selecciona **"Guardar y Salir"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

***'¿Desea guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'***

8. Seleccione:

- **Sí**, para almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser iLIB

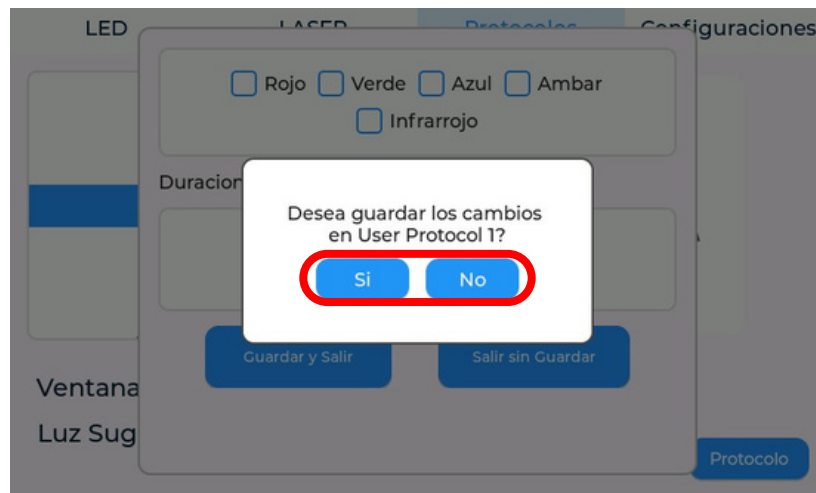

9. Si selecciona **"Salir sin Guardar"**:

- El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

*'¿Salir sin guardar los cambios en 'Nombre del protocolo'?'*

10. Seleccione:

- **Sí**, para salir sin almacenar los cambios realizados.
- **No**, para regresar a la pantalla de edición sin guardar modificaciones.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Protocolos

#### PROTOCOLOS PERSONALIZADOS

##### Láser iLIB

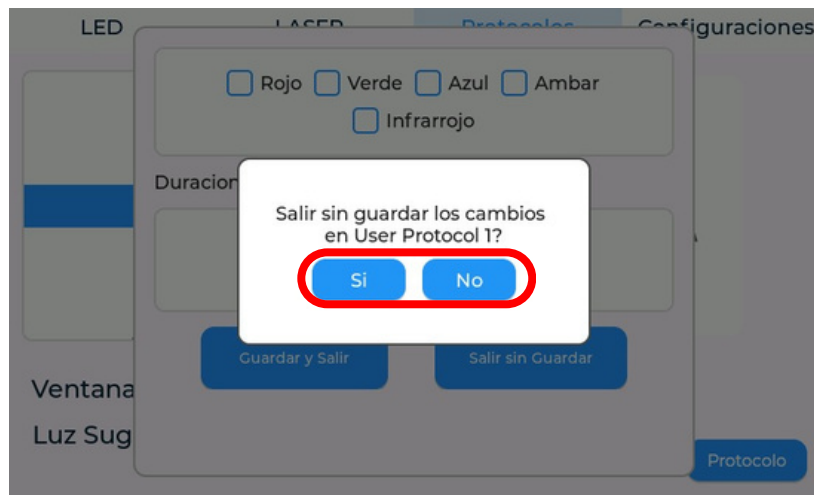

**Observación:** De esta manera, el sistema solicita confirmación antes de guardar o descargar modificaciones, brindando mayor seguridad en la gestión de protocolos personalizados.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

1. Acceda a la pestaña de **configuraciones** para realizar ajustes generales del sistema.



2. En esta pantalla podrá:

- Ajustar el **brillo de la pantalla**.
- Seleccionar el tema de visualización del dispositivo (**light mode** o **dark mode**).



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones



3. En la parte inferior se mostrarán las opciones “*Información*” y “*Home*”.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

1. Dentro del apartado "**Configuraciones**", seleccione la opción "**Información**".



2. El sistema desplegará dos opciones:

- Acerca de
- Utilidades



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Acerca de*

3. Seleccione "**Acerca de**" para visualizar información general del dispositivo.



#### Incluyendo:

- Referencias terapéuticas utilizadas.
- Profesionales que participaron en el desarrollo clínico.
- Equipo de trabajo responsable del diseño y desarrollo del dispositivo.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN


---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

##### *Acerca de*

4. Seleccione la opción "**Cerrar**" para salir del apartado actual.
5. El sistema regresará automáticamente a la pantalla general de "**Configuraciones**" (menú principal de configuraciones).

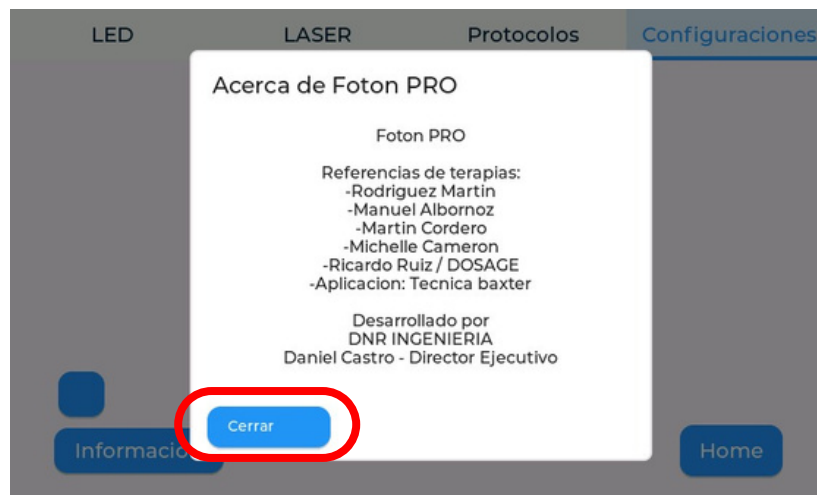

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Log Buffer*

1. Dentro del apartado "**Configuraciones**", seleccione la opción "**Información**".



2. El sistema desplegará dos opciones:

- **Acerca de**
- **Utilidades**



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Log Buffer*

3. Seleccione "**Utilidades**" para acceder a herramientas internas del sistema.



4. Seleccione "**Log Buffer**", se visualizará el registro de eventos y posibles errores generados durante:

- Encendido del equipo.
- Carga de imágenes.
- Carga de sonidos.
- Carga de protocolos.

**Observación:** Estos registros se generan únicamente si se detecta algún evento o anomalía durante el arranque.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Log Buffer*



5. El sistema lo dirigirá a la **pantalla de registros**, donde podrá visualizar los eventos de funcionamiento:

- Image preload complete: 32/32 images loaded.
- User protocols loaded from C6 (5 entries).
- Protocols merged: 37 total.
- Bridge Monitor Timer Started.
- Setup done.

**Observación:** El contenido de **Log Buffer** se elimina automáticamente al apagar y volver a encender el equipo, si el operador desea revisar el código de error que apareció en el apartado de "**Registro de Errores y Función**" ir al apartado de "**Troubleshooting**".

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones


#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Log Buffer*

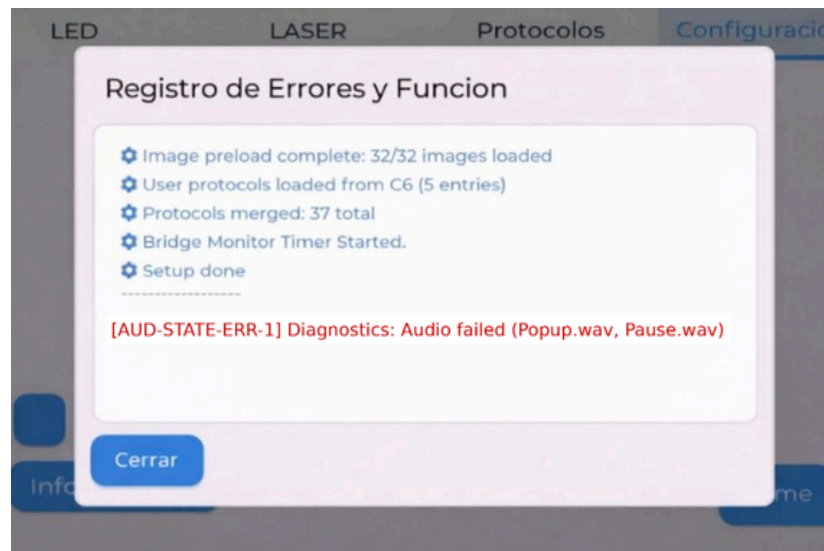

6. Seleccione la opción "**Cerrar**" para salir del apartado actual.

7. El sistema regresará automáticamente a la pantalla general de "**Configuraciones**" (menú principal de configuraciones).

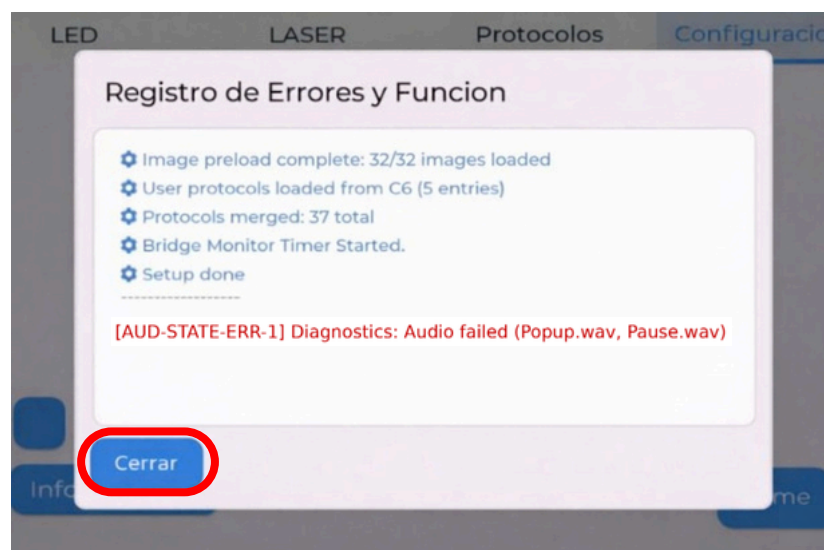

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Diagnostico*

1. Dentro del apartado "**Configuraciones**", seleccione la opción "**Información**".



2. El sistema desplegará dos opciones:

- **Acerca de**
- **Utilidades**



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### *Utilidades - Diagnostico*

3. Seleccione "**Utilidades**" para acceder a herramientas internas del sistema.



4. Seleccione "**Diagnostico**".



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

#### Utilidades - Diagnostico


5. El sistema mostrará el siguiente aviso:

#### ***'ATENCIÓN: Diagnostico de Sistema***

***Ejecutar el diagnostico brevemente todas las operaciones y puede causar parpadeo en la pantalla. ¿Desea continuar?'***

Opciones:

- **Cancelar**
- **Aceptar**

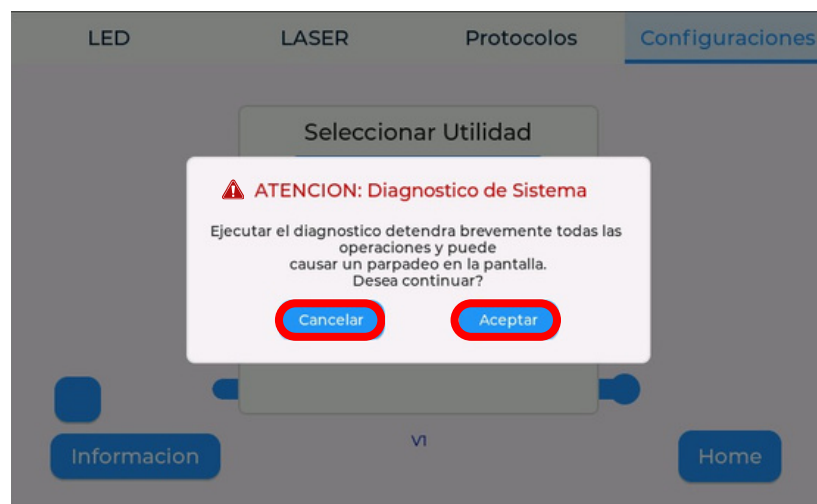

6. Si selecciona "**Cancelar**", el sistema regresará a la pantalla anterior.

7. Si selecciona "**Aceptar**", el sistema iniciará el proceso de diagnóstico. Durante este procedimiento, siga las instrucciones que se indiquen en pantalla hasta su finalización.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN


---

### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

##### *Utilidades - Diagnóstico*

8. Una vez concluido, se mostrará la pantalla de "**Diagnóstico del Sistema**", donde podrá visualizar el estado general de los módulos del equipo.
9. Si todos los componentes se encuentran en correcto funcionamiento, el sistema lo indicará en pantalla.

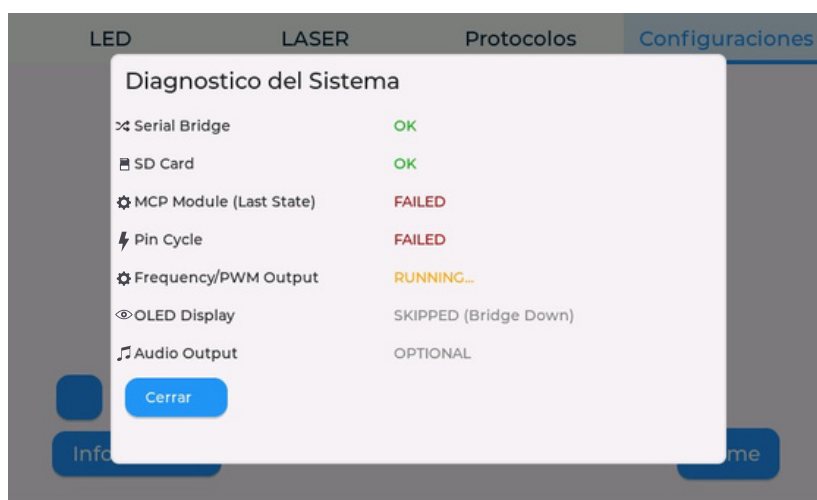

10. En caso de que el **Diagnóstico del Sistema indique alguna anomalía**, se recomienda consultar la sección de **Troubleshooting** incluida en este manual.

**Importante:** En dicha sección se presentará una ficha técnica de solución de problemas, donde cada código o tipo de error identificado en el diagnóstico contará con:

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---


### Pestaña Configuraciones

#### INFORMACIÓN

##### *Utilidades - Diagnostico*

- Descripción del evento.
- Posibles causas asociadas.
- Recomendaciones generales de verificación inicial.

Esta información tiene como objetivo orientar al operador para identificar la posible causa del evento antes de solicitar soporte técnico especializado.

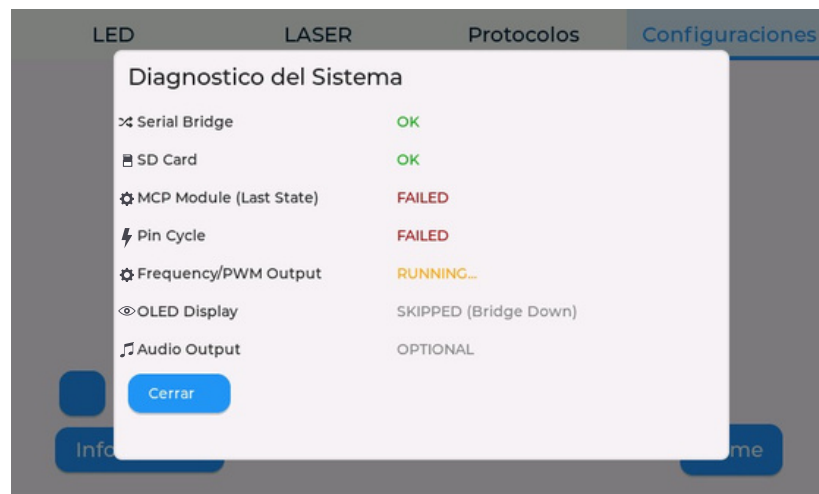

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

Antes de realizar la instalación del equipo, es necesario ***identificar correctamente los diferentes puertos de conexión y elementos de control ubicados en el panel del dispositivo.***

#### 1. Entradas para diodos:

El equipo cuenta con tres puertos destinados a la conexión de los diodos. Estos se encuentran dispuestos de izquierda a derecha en el siguiente orden:

- Azul
- Rojo
- Infrarrojo

#### 2. Conector de los pads led:

Seis puertos destinados a la conexión de los pads, diseñado para asegurar un acoplamiento firme y seguro.

#### 3. Interruptor de encendido/apagado:

Control principal que permite energizar o desenergizar el equipo.

#### 4. Entrada de la fuente de alimentación:

Puerto destinado a la conexión de la fuente de alimentación externa del dispositivo.



# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

Posterior a la revisión previa realizada por el operador, en la cual se identificaron y explicaron los conectores ubicados en la parte posterior del equipo, se procederá a efectuar la instalación y conexión del sistema conforme al procedimiento.

#### *Verificación inicial:*

- Asegurar que el equipo no se encuentre energizado.
- Confirmar que el interruptor general se encuentre en posición **OFF**.
- Corroborar la integridad física de cables y conectores.

1. Localice la entrada correspondiente a la fuente de poder en la parte posterior del equipo, así como el cable de alimentación suministrado.
2. Antes de conectar a la red eléctrica inserte el conector del cable en el puerto de alimentación del equipo.

**Observación:** El conector cuenta con una **marca indicadora (círculo rojo)** en su extremidad, la cual debe **alinearse y coincidir** con la marca roja ubicada en el puerto del dispositivo.

Inserte el conector hasta el fondo sin aplicar fuerza excesiva.

**NOTA:** El conector se considerará correctamente asegurado cuando se perciba el mecanismo de bloqueo completamente acoplado.



**No conecte el cable a la red eléctrica antes de haberlo fijado completamente al equipo. Conectar primero a la corriente alterna puede generar riesgo de descarga eléctrica o daño a los componentes internos.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

3. Una vez verificada la correcta fijación del conector en el equipo, conecte al extremo correspondiente del cable a una toma de corriente alterna.

### Conexión de los Pads

4. Localice los puertos correspondiente a los pads en el panel posterior del equipo.

**Observación:** Los conectores de los pads cuenta con una **marca indicadora (círculo rojo)**, la cual debe **alinearse y coincidir** con la marca roja ubicada en el puerto del dispositivo.

Antes de iniciar el tratamiento (no necesariamente antes del encendido del equipo), conecte los pads insertando los terminales hasta su fijación completa sin ejercer fuerza excesiva.

**NOTA:** El conector se considerará correctamente asegurado cuando se perciba el mecanismo de bloqueo completamente acoplado.

Una vez verificada todas las conexiones:

- Coloque el interruptor de encendido/apagado en posición **ON**.
- El equipo iniciará su secuencia de arranque.

**Observación:** El sistema puede tardar aproximadamente 20 segundos en completar la carga inicial, incluyendo pantalla, protocolos, configuraciones preestablecidas, imágenes y señales sonoras.

**NOTA:** No manipule los aplicadores durante el proceso de arranque.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

#### Conexión de los Diodos Láser

La conexión de los diodos láser deberá realizarse únicamente cuando se haya seleccionado el modo de terapia láser en el sistema.

En el panel posterior del equipo se encuentran tres conectores destinados a los diodos emisores de luz, dispuestos de izquierda a derecha en el siguiente orden:

- Azul
- Rojo
- Infrarrojo

Cada puerto corresponde exclusivamente a su respectivo longitud de onda y debe respetarse dicha asignación para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

5. Identifique el puerto correspondiente al tipo de luz que se utilizará.
6. Verifique que el conector del cable del diodo corresponda al puerto seleccionado.
7. Observe que tanto el conector como el puerto cuentan con una **guía mecánica** de alineación (muesca rectangular/cuadrada).
8. Alinee correctamente dicha guía antes de insertar el conector.



*No gire el conector forzosamente si no embona de manera inmediata. Si el conector no entra con facilidad, retírelo, verifique la alineación de la guía mecánica y vuelva a intentarlo. Forzar la inserción puede dañar el pin interno o el sistema de fijación.*

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

9. Inserte el conector hasta asegurar su fijación completa.

Verifique que la alineación de las guías mecánicas sea correcta antes de aplicar presión.

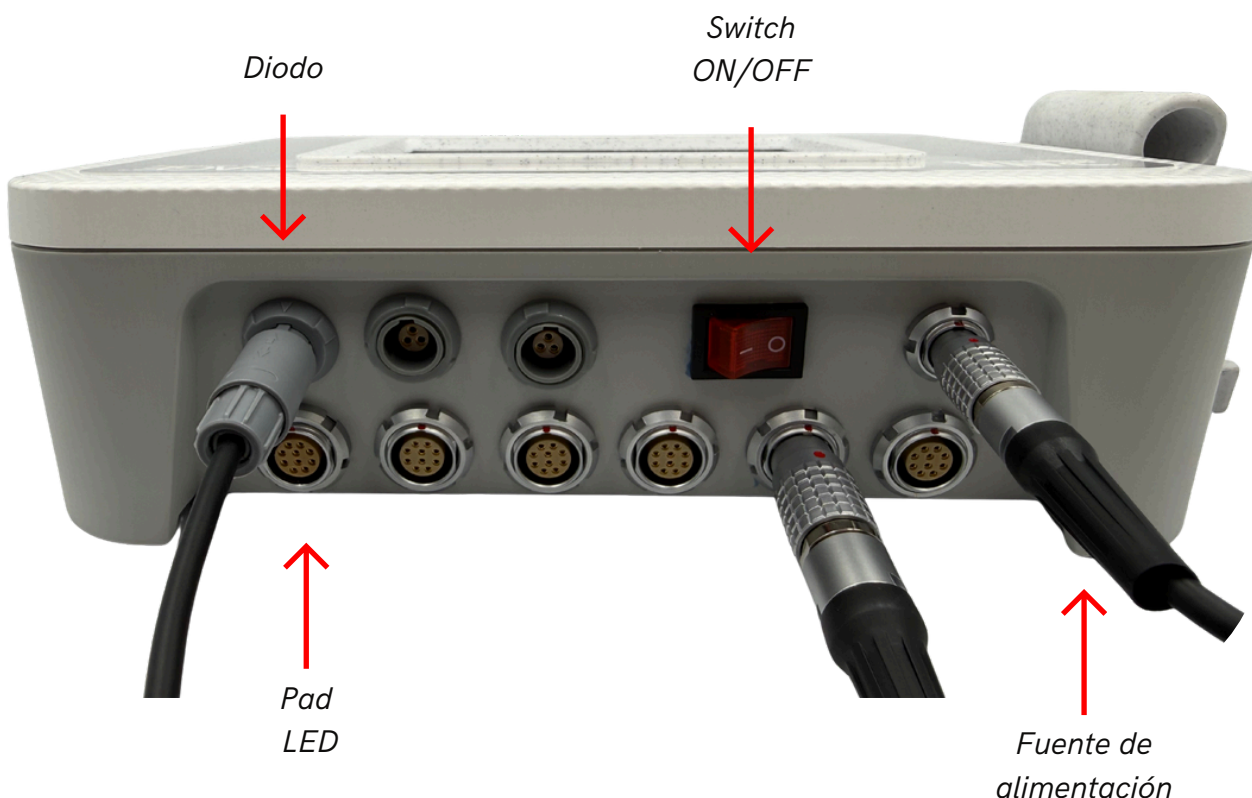

En la imagen presentada se puede observar la disposición correcta de los conectores y la forma adecuada en que deben instalarse los accesorios para garantizar su correcto funcionamiento.

**Observación:** Se recomienda utilizar esta referencia visual como apoyo para la verificación de la posición correspondiente de cada diodo (azul, rojo e infrarrojo), la alineación adecuada de las guías mecánicas de los conectores y la correcta fijación del aplicador de potencia y la fuente de alimentación.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TEORÍA DE OPERACIÓN

---

### Instalación y Conexión

#### Procedimiento de apagado

Para desenergizar el equipo, siga la secuencia indicada a continuación.

- Coloque el interruptor de encendido/apagado en posición **OFF**.
- Una vez confirmado el apagado total del sistema, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente alterna.



*No desconecte el equipo directamente de la corriente alterna sin haberlo apagado previamente desde el interruptor principal, ya que esto puede provocar daños en los componentes electrónicos o afectar la vida útil del sistema.*

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## PROCEDIMIENTO DE USUARIO

---

### Diodos Láser

El presente apartado describe las verificaciones operativas que deben ser realizadas por el usuario para asegurar el correcto funcionamiento de los diodos láser (azul, rojo e infrarrojo).

**NOTA:** Estas actividades forman parte del control rutinario del equipo y no sustituyen el mantenimiento preventivo realizado por el proveedor autorizado.

### Verificación funcional de diodos láser

Se deberá verificar periódicamente que los cables y conectores de los diodos láser se encuentren en buen estado y que no presenten falso contacto durante su funcionamiento.

El equipo cuenta con tres diodos láser:

- Azul
- Rojo
- Infrarrojo

### Procedimiento de verificación

1. Encender el equipo.
2. Configurar los parámetros en:
  - **20 J/cm<sup>2</sup>**
  - **10 kHz**
3. Conectar los tres diodos láser en sus terminales correspondientes.
4. Dirigir los aplicadores hacia una superficie plana (pared) a una distancia aproximada de **50 cm**.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## PROCEDIMIENTO DE USUARIO

---

### Diodos Láser

5. Iniciar la terapia.


### Consideraciones para la verificación visual

- La emisión de los diodos **azul y rojo** puede verificarse directamente a percepción visual sobre la superficie.
- La emisión del diodo infrarrojo no es visible al ojo humano, por lo que su funcionamiento no puede confirmarse visualmente de manera directa.

### Para verificar la emisión del diodo infrarrojo, se podrá:

- Utilizar la cámara de un dispositivo móvil, ya que algunas cámaras permiten visualizar la emisión infrarroja como un punto de luz.
- Verificar en la pantalla del equipo que la terapia se encuentre activa y que no se presente algún tipo de mensaje de error.
- Confirmar que no exista interrupción durante la flexión moderada del cable.

**NOTA:** No todos los dispositivos móviles permiten visualizar la luz infrarroja, por lo que la ausencia de visualización en la cámara no necesariamente indica fallo del diodo.

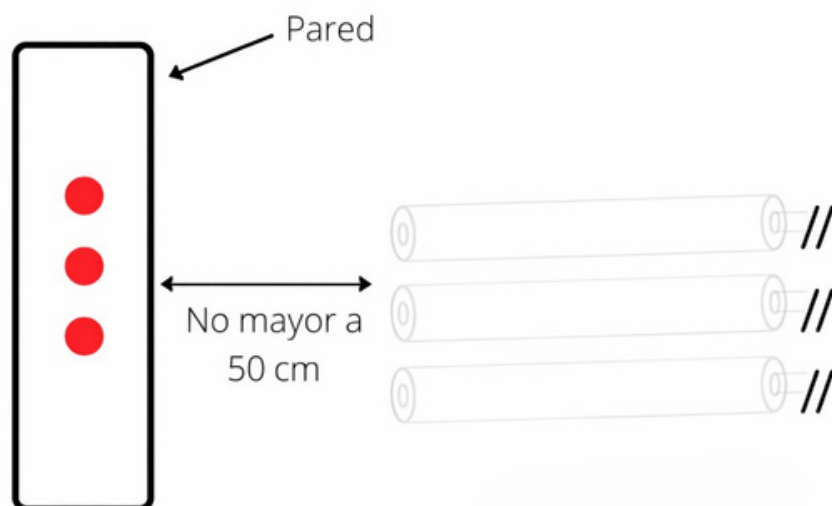

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## PROCEDIMIENTO DE USUARIO

---

### Diodos Láser

#### Criterios de Evaluación

- Si durante la flexión del cable se interrumpe la emisión de luz, puede existir falso contacto.

En este caso, suspender el uso del diodo y comunicarse con el proveedor autorizado.

- Si la emisión de luz permanece constante sin interrupciones, los cables y conectores del diodo se encuentran en buen estado.



***Evitar la exposición directa de la luz láser a los ojos durante la prueba.***

#### Almacenamiento y manipulación de punteros láser

Los punteros láser deberán almacenarse de manera ordenada, evitando que los cables se enreden o se sometan a torsión excesiva, con el fin de preservar su integridad y prolongar su vida útil.

**NOTA:** Para su desconexión, nunca se debe tirar del cable. La desconexión deberá realizarse sujetando firmemente el conector sólido y retirándolo de manera recta, evitando esfuerzos mecánicos que puedan dañar el conductor o generar falsos contactos.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

### Sistema físico del equipo

| Condición detectada                                                                                  | Causa probable                                                       | Acción correctiva o verificación                                                                                      | Área responsable     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| El equipo no enciende                                                                                | Conexión eléctrica incorrecta o inexistente                          | Verificar las conexiones eléctricas y asegurar que el equipo esté correctamente conectado a la fuente de alimentación | Operador             |
| Los LED de los pads no encienden                                                                     | Posible falso contacto o daño en el LED                              | Ejecutar el procedimiento de verificación descrito en la sección <b>"Pads LED"</b> del presente manual                | Operador             |
| Los diodos láser no encienden                                                                        | Conexión incorrecta del aplicador láser en el puerto correspondiente | Verificar que cada aplicador láser se encuentre conectado en la entrada correspondiente a su longitud de onda         | Operador             |
| Disminución o ausencia de potencia en los diodos (rojo o azul)                                       | Posible falso contacto, falla en el driver o daño en el diodo.       | Ejecutar el procedimiento de verificación descrito en la sección <b>"Diodos Láser"</b> del presente manual            | Operador             |
| Encendido del indicador luminoso inferior del equipo (blanco) al iniciar el equipo                   | Pérdida momentánea de energía                                        | Reiniciar el equipo. Si la condición persiste, contactar al fabricante o al servicio técnico autorizado.              | Operador /Fabricante |
| Encendido del indicador luminoso inferior del equipo dependiendo de la longitud de onda seleccionada | Pérdida de comunicación con la tarjeta electrónica                   | Realizar el procedimiento de diagnóstico del dispositivo descrito en el presente manual                               | Operador /Fabricante |
| Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) no responde                                                | Desoldadura del cableado interno o daño en la tarjeta electrónica    | Verificar el estado del interruptor. En caso de persistir la falla, contactar al fabricante                           | Fabricante           |

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

---

### Arquitectura interna

En esta sección se describen los **posibles errores o eventos** que pueden presentarse durante el funcionamiento del dispositivo, así como la forma en que estos pueden ser identificados a través del sistema interno de diagnóstico.


El equipo cuenta con un **sistema de registro de eventos** que almacena información relacionada con el estado operativo del dispositivo y posibles anomalías detectadas durante su uso. Dichos registros pueden ser consultados por el operador desde la interfaz del equipo accediendo a:

**Configuraciones** → **Información** → **Utilidades** → **Log Buffer**

Dentro de esta sección se encuentra el apartado "**Registros de errores y función**", donde se muestran los códigos generados por el sistema cuando se detecta una condición fuera de los parámetros normales de operación.

Estos códigos permiten identificar el origen y la naturaleza de una condición detectada durante la operación. Cada código está estructurado en diferentes segmentos que corresponden a elementos específicos del sistema.

### Estructura del código de error

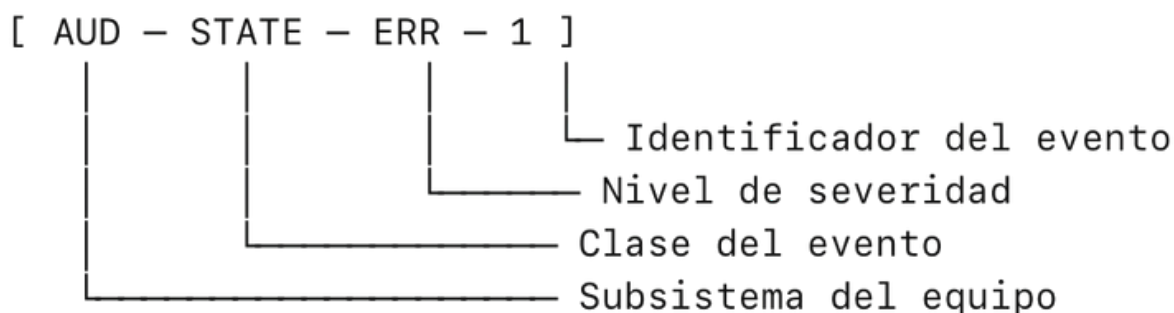

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

---

### Arquitectura interna

#### Subsistema del equipo

Indica el módulo o componente interno donde se originó el evento.

| CÓDIGO | SUBSISTEMA             |
|--------|------------------------|
| BRG    | Puente de comunicación |
| SD     | Tarjeta SD             |
| UI     | Interfaz de usuario    |
| SYS    | Sistema general        |
| AUD    | Módulo de audio        |
| MCP    | Controlador principal  |

#### Clase del evento

Define el tipo de condición detectada dentro del subsistema.

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                               |
|---------|-------------------------------------------|
| INIT    | Inicialización                            |
| TIMEOUT | Tiempo de espera excedido (sin respuesta) |
| IO      | Entradas / salidas                        |
| STATE   | Estado del sistema                        |

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

---

### Arquitectura interna

#### Nivel de severidad

El nivel de severidad indica el **grado de impacto que tiene la condición detectada sobre el funcionamiento del sistema**. Esta clasificación permite al operador identificar si el evento es únicamente informativo o si requiere intervención por parte del fabricante.

| NIVEL | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | INFO   | Evento informativo sin impacto en el funcionamiento del sistema                                                                 |
| 2     | WARN   | Condición de advertencia. El sistema presenta comportamiento degradado, pero continúa siendo operable                           |
| 3     | ERR    | Error durante la ejecución de una operación. La acción solicitada no se completa, sin embargo el sistema continúa funcionando   |
| 4     | FATAL  | Error crítico. No se puede garantizar el funcionamiento correcto del sistema y puede requerirse reinicio o intervención técnica |

#### Identificador del evento

Número consecutivo utilizado para identificar el evento específico dentro del sistema.

[AUD-STATE-ERR-1]

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

---

### Arquitectura interna

Una vez identificado el **subsistema**, la **clase del evento** y el **nivel de severidad**, el sistema muestra también una **breve descripción del diagnóstico** asociado al evento detectado. Esta información se presenta junto al código de registro con el objetivo de facilitar la identificación del problema.

*Ejemplo de registro mostrado en el sistema:*

```
[AUD-STATE-ERR-1]  
Diagnostics: Audio failed (Popup.wav, Pause.wav)
```

**NOTA:** Los registros se muestran en la sección "Registros de errores y función" del menú de diagnóstico. **El historial corresponde únicamente a la sesión actual de operación y se elimina automáticamente al apagar el dispositivo.** Al encender nuevamente el equipo, **se inicia un nuevo registro de eventos.**

### Error crítico en pantalla principal

Cuando el sistema detecta una falla crítica de comunicación interna, el equipo mostrará una **franja roja en la parte inferior de la pantalla principal** con el mensaje de error correspondiente.

Este tipo de evento indica una falla interna del sistema que impide el funcionamiento correcto del dispositivo.

*Ejemplo de mensaje mostrado en pantalla:*

 **ERROR: Puente de comunicación no responde!** 

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## TROUBLESHOOTING

---

### Arquitectura interna



En caso de presentarse este mensaje, **el operador no debe continuar utilizando el equipo**. El dispositivo deberá **ser enviado al fabricante o al servicio técnico autorizado** para su diagnóstico y verificación interna.





# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## CONTRAINDICACIONES

### Terapia Láser

El uso del dispositivo **Láser Terapéutico Veterinario VETLIGHT** está contraindicado o debe evitarse en determinadas condiciones clínicas del paciente.


**Antes de iniciar cualquier tratamiento**, el médico veterinario u operador debe evaluar el estado general del animal, su historial clínico y la zona de aplicación, con el fin de garantizar un uso seguro del dispositivo.
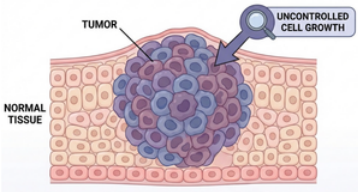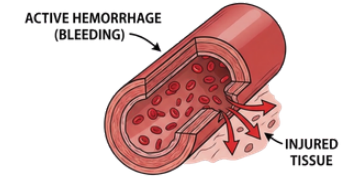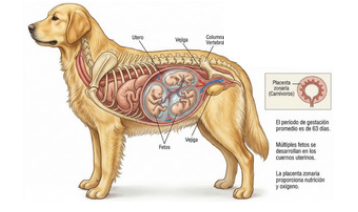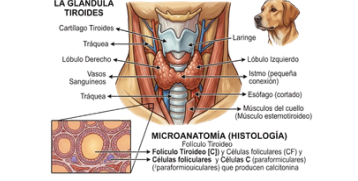
| Contraindicación                                 | Representación                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tumores o tejido potencialmente canceroso</b> |   | No aplicar el láser sobre áreas donde se sospeche o exista tejido maligno. La estimulación metabólica producida por la terapia láser podría favorecer la proliferación celular.     |
| <b>Hemorragias activas</b>                       |  | Evitar la aplicación en zonas con hemorragia activa, ya que la vasodilatación inducida por el tratamiento podría aumentar el flujo sanguíneo y agravar el sangrado.                 |
| <b>Gestación</b>                                 |  | No aplicar el láser directamente sobre el abdomen o región lumbar de animales gestantes, debido a la falta de evidencia concluyente sobre su seguridad durante el desarrollo fetal. |
| <b>Glándula tiroides</b>                         |  | No aplicar directamente sobre la región de la glándula tiroides, ya que la radiación láser podría alterar su función hormonal en el paciente.                                       |

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## CONTRAINDICACIONES

### Terapia Láser
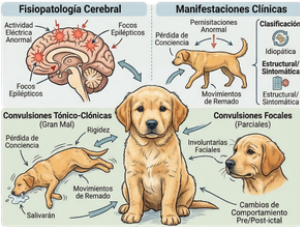
| Contraindicación                       | Representación                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epilepsia                              |    | Evitar la aplicación en la región craneal en pacientes con antecedentes de epilepsia, ya que la estimulación luminosa podría modificar la excitabilidad neuronal y potencialmente desencadenar episodios convulsivos.                |
| Tejido necróticos o infecciones graves |   | Evitar la aplicación sobre tejido necrótico o en zonas con infecciones graves no tratadas, ya que el aumento del metabolismo tisular podría empeorar la condición clínica o favorecer la diseminación del proceso infeccioso.        |
| Aplicación directa en los ojos         |  | <p>Nunca dirigir el haz láser directamente hacia los ojos del animal, del operador o de terceros.</p> <p>Se deben utilizar gafas de protección adecuadas para la longitud de onda del dispositivo durante todo el procedimiento.</p> |

**NOTA:** Durante la terapia láser veterinaria, **el operador debe asegurar una adecuada inmovilización del animal** para evitar movimientos bruscos que puedan provocar una **exposición accidental del haz láser en zonas sensibles como ojos u otras estructuras vulnerables.**

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT

## CONTRAINDICACIONES

---

### Fototipo Veterinario

En medicina veterinaria, no se emplea una clasificación estandarizada de fototipos como en humanos; sin embargo, es fundamental considerar la **pigmentación de la piel y el pelaje del paciente**, ya que estos factores influyen en la absorción de la energía láser y en la respuesta terapéutica.

| TIPO               | CARACTERÍSTICAS                                         | CONSIDERACIONES PARA LÁSER                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Baja pigmentación  | Piel clara, pelaje blanco o claro                       | Menor absorción (puede requerir mayor densidad energética)                   |
| Pigmentación media | Piel rosada a ligeramente pigmentada, pelaje intermedio | Parámetros estándar                                                          |
| Alta pigmentación  | Piel oscura, pelaje negro o muy denso                   | Mayor absorción (reducir el ciclo de trabajo para evitar sobrecalentamiento) |

### Recomendaciones de uso

- Reducir el **ciclo de trabajo (duty cycle)** según la pigmentación.
- En animales con pelaje oscuro o denso, considerar:
  1. Rasurar la zona.
  2. Disminuir potencia o aumentar tiempo de forma controlada.
- Vigilar signos de **sobrecalentamiento tisular** en pieles altamente pigmentadas.
- Aplicar el láser en **contacto directo con la piel** siempre que sea posible.

Tomar en cuenta que la penetración de la energía láser puede verse afectada por el tipo de cobertura del paciente (**pelaje, plumas o escamas**), así como por la **pigmentación de la piel**.

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## CONTRAINDICACIONES

### Fototipo Veterinario

En mamíferos, **el pelaje puede dispersar o reducir la energía** que alcanza los tejidos, por lo que se recomienda:

- Aplicar el láser en contacto directo con la piel.
- Rasurar la zona en caso necesario.
- Ajustar la densidad energética según la pigmentación.

Las longitudes de onda en el rango rojo e infrarrojo cercano permiten una mayor penetración y efecto a nivel celular.

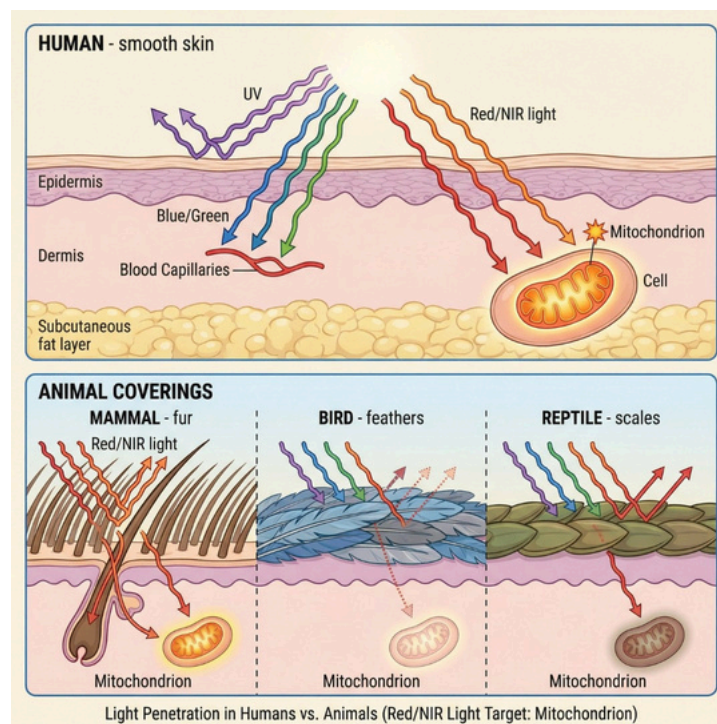

***La melanina actúa como cromóforo, aumentando la absorción de la radiación láser. A mayor pigmentación, mayor riesgo de acumulación térmica en tejidos superficiales.***

# LÁSER TERAPÉUTICO - VETERINARIO VETLIGHT


## CONTRAINDICACIONES

### Fototipo Veterinario

En mamíferos, **el pelaje puede dispersar o reducir la energía** que alcanza los tejidos, por lo que se recomienda:

- Aplicar el láser en contacto directo con la piel.
- Rasurar la zona en caso necesario.
- Ajustar la densidad energética según la pigmentación.

Las longitudes de onda en el rango rojo e infrarrojo cercano permiten una mayor penetración y efecto a nivel celular.

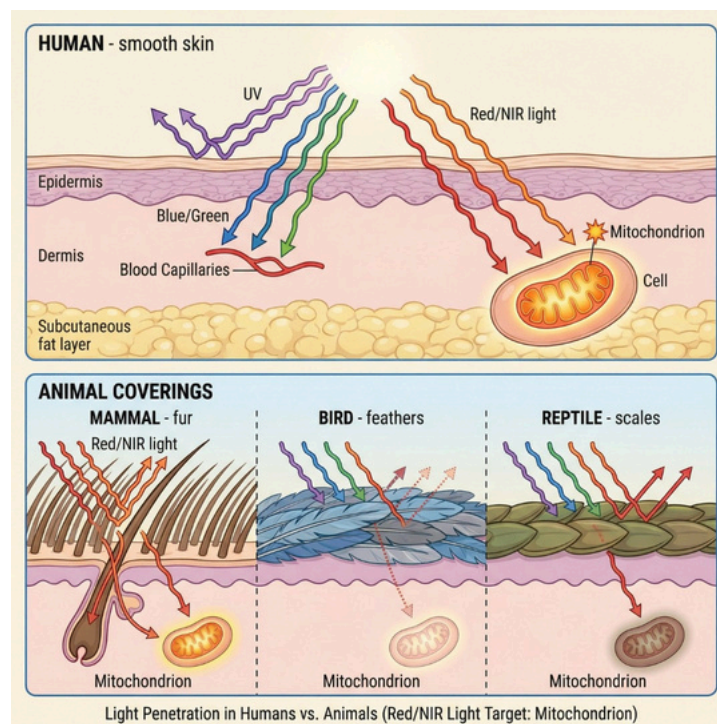

***La melanina actúa como cromóforo, aumentando la absorción de la radiación láser. A mayor pigmentación, mayor riesgo de acumulación térmica en tejidos superficiales.***

# GARANTÍA

DNR Ingeniería (en adelante, la "Compañía") garantiza que el Láser Terapéutico Veterinario VETLIGHT (en adelante, el "Producto") se encuentra libre de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso y operación conforme a lo establecido en el Manual de Usuario.

La presente garantía tendrá vigencia de **un (1) año - doce (12) meses** - contados a partir de la fecha de compra original por parte del consumidor.

En caso de que el Producto presente fallas durante el período de garantía como consecuencia directa de defectos en materiales o fabricación, la Compañía, a su entera discreción podrá optar por reparar o reemplazar el Producto sin costo alguno. Dicha reparación o sustitución se realizará dentro de un plazo máximo de **treinta (30) días naturales** contados a partir de la fecha de recepción del Producto en las instalaciones de la Compañía o del distribuidor autorizado.

Todas las reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por un centro de servicio técnico certificado por la Compañía. Cualquier modificación, alteración o intervención realizada por el personal o centros no autorizados invalidará automáticamente la presente garantía. El periodo de garantía aplicable a ciertos accesorios es de **noventa (90) días**. Para los punteros láser y los pads LED, el período de garantía será de **un (1) año - doce (12) meses**.

## Esta garantía no cubre:

- Piezas de repuesto o servicios de mano de obra suministrados por personas, técnicos o centros de servicio que no estén debidamente autorizados por la Compañía.
- Defectos, daños o fallas derivados de intervenciones técnicas, reparaciones, modificaciones o mantenimientos realizados por personal no certificado por la Compañía.

# GARANTÍA

- Cualquier mal funcionamiento, daño o deterioro del Producto ocasionado por uso indebido, negligencia, manipulación incorrecta, instalación inadecuada o falta del mantenimiento preventivo razonable o requerido.
- Cualquier uso del Producto que no sea conforme a las especificaciones técnicas, condiciones de operación y lineamientos establecidos en el Manual de Usuario.

## **LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.**

Algunas localidades o marcos legales aplicables no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños incidentales o consecuentes; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones anteriormente descritas podrían no ser aplicables en determinados casos.

Para obtener servicio bajo la presente garantía por parte de la Compañía o del distribuidor autorizado:

1. El usuario deberá presentar una reclamación por escrito dentro del período de vigencia de la garantía, dirigida a la Compañía o al distribuidor vendedor autorizado. Las reclamaciones dirigidas a la Compañía deberán enviarse a la siguiente dirección:

daniel.a.castro.pasos@gmail.com

Dirección: \_\_\_\_\_

Número: +52 552 669 6371

# GARANTÍA

2. El Producto deberá ser devuelto a la Compañía o al distribuidor autorizado por parte del propietario. Antes de realizar cualquier envío, deberá obtenerse un número de Autorización de Devolución (RA). No se aceptarán devoluciones sin la autorización previa correspondiente. La presente garantía otorga derechos legales específicos al comprador, quien podrá contar además con otros derechos que pueden variar conforme a la legislación aplicable.
3. La Compañía no autoriza a ninguna persona, representante, distribuidor o tercero a asumir obligaciones adicionales ni a crear responsabilidades distintas a las expresamente establecidas en la presente garantía en relación con la venta del Producto.
4. Cualquier declaración, compromiso o acuerdo que no esté expresamente contemplado en los términos de esta garantía carecerá de validez y no producirá efecto legal alguno.

**LA GARANTÍA ANTERIOR SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA O COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.**

# NOTAS DEL VENDEDOR